



EO-300

Dispositif de thérapie IPPB



Fonction Coaching

Activer la fonction Coaching

L'utilisateur peut aller sur l'écran Coaching pour faire une thérapie qui a été préalablement sauvegardé dans un préréglage par le personnel médical.

NOTE:	La fonction Coaching n'est disponible que pour les préréglages contenant des thérapies en mode INEX Auto ou en mode IPPB.
--------------	---


Depuis l'écran clinique, cliquer sur  pour afficher l'écran «Fonction Coaching»

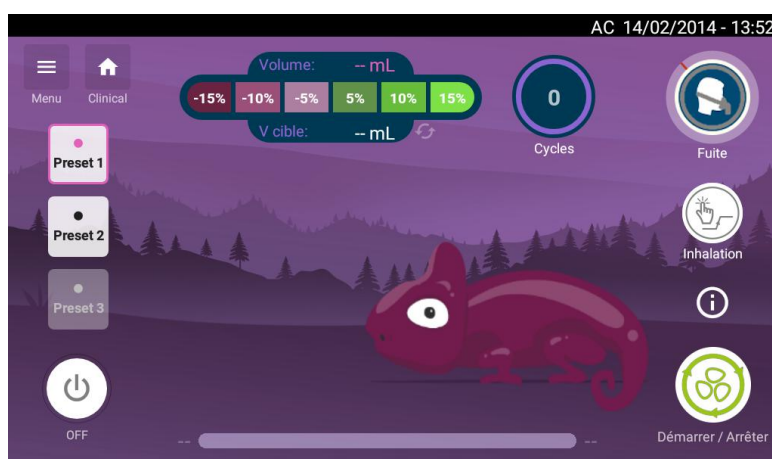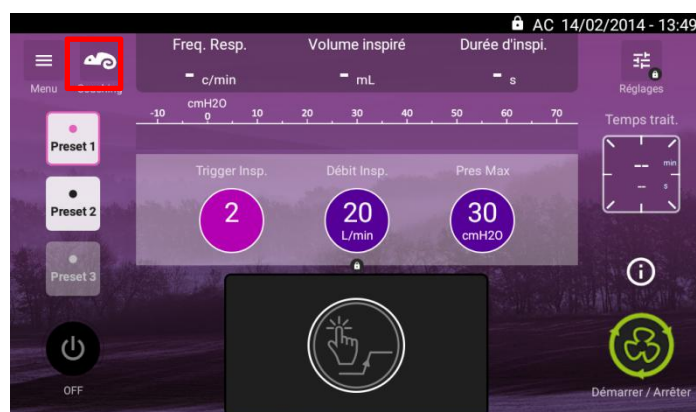

NOTE:	La fonction Coaching n'est utilisable que si un préréglage est sélectionné.
	Si le message sur l'écran indique qu'aucun des préréglages disponibles n'est compatible, contacter votre clinicien.


Changer de préréglage sur l'écran Coaching

- | |
|-------------------------|
| 1. Préréglage activé |
| 2. Préréglage activable |
| 3. Préréglage vide |

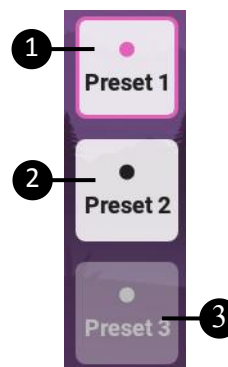

Pour changer de préréglage, cliquer sur le préréglage désiré.
Si une thérapie est en cours, il n'est pas possible de changer de préréglage.

L'écran Coaching en IPPB

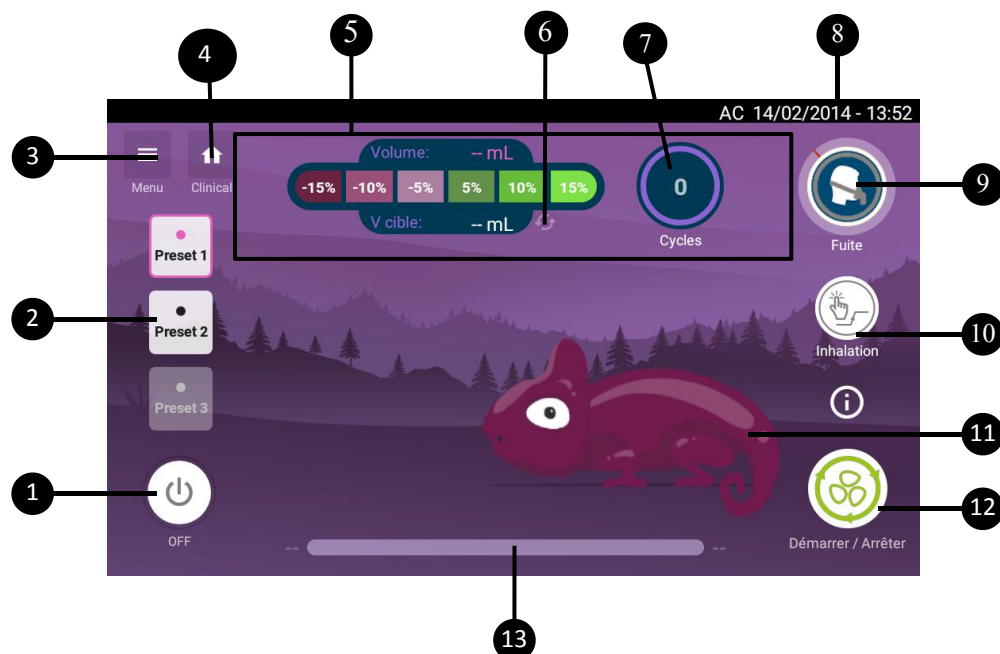

1. Bouton d'extinction	8. Date et heure: indique la date au format AAAA/MM/JJ et l'heure au format 24h. Ils peuvent être changés depuis le menu préférences.
2. Préréglages (1-3) : Préréglages accessibles au patient.	9. Indicateur de fuite
3. Bouton menu : Donne accès aux différents menus	10. Bouton Trigger: permet de déclencher manuellement une inspiration pendant une thérapie.
4. Bouton écran clinique: donne accès à l'écran clinique	11. Caméléon: Animation qui suivra la thérapie paramétré pour aider le patient
5. Monitorages de thérapie: affiche les valeurs monitorées en temps réel pendant la thérapie.	12. Bouton arrêt démarrage: démarre ou arrête la thérapie.
6. Réinitialisation du volume cible précédemment défini	13. Barre de temps de thérapie: affiche le temps de thérapie passé et le temps de thérapie restant
7. Nombre de respiration	

Utilisation de la fonction coaching pour réaliser une thérapie IPPB

Sélectionner un préréglage en mode IPPB et démarrer la thérapie. Suivant le paramétrage, l'inspiration peut soit être déclenchée par le patient, soit en utilisant le bouton dédié.

Le monitoring du Volume montre l'évolution en direct du volume durant l'inspiration. Ce monitoring reste à la valeur du volume final jusqu'à la prochaine inspiration. Le compteur de cycle est incrémenté au début de chaque inspiration.

À la fin de chaque inspiration, les fuites de l'interface sont évaluées et l'indicateur de fuite  devient vert ou orange. Un indicateur orange indiquera qu'il y a trop de fuite à l'interface patient et qu'elle doit être mieux ajustée.

Pendant l'inspiration, le caméléon gonflera en suivant la proportion du volume cible atteinte. Il changera progressivement de couleur vers le vert, quand le volume atteindra et dépassera le volume cible.

Pour les 3 premières inspirations:

- Le caméléon ne bouge pas
- Le monitoring Volume Cible reste indéfini

Après 3 inspirations:

- le Volume Cible est défini. C'est le volume moyen des 3 premières inspirations. Il reste inchangé jusqu'à la fin de la thérapie.

Pendant l'expiration, le caméléon dégonflera progressivement jusqu'à revenir à la taille et à la couleur de départ. Il restera ainsi jusqu'à la prochaine inspiration. La flèche du graphique de volume bougera suivant la proportion du volume cible atteinte. Elle restera au niveau maximum atteint jusqu'à la prochaine inspiration.

