


EOVE+



EO-70

функцията за подпомагане

Екран на функцията за подпомагане при INEX терапия

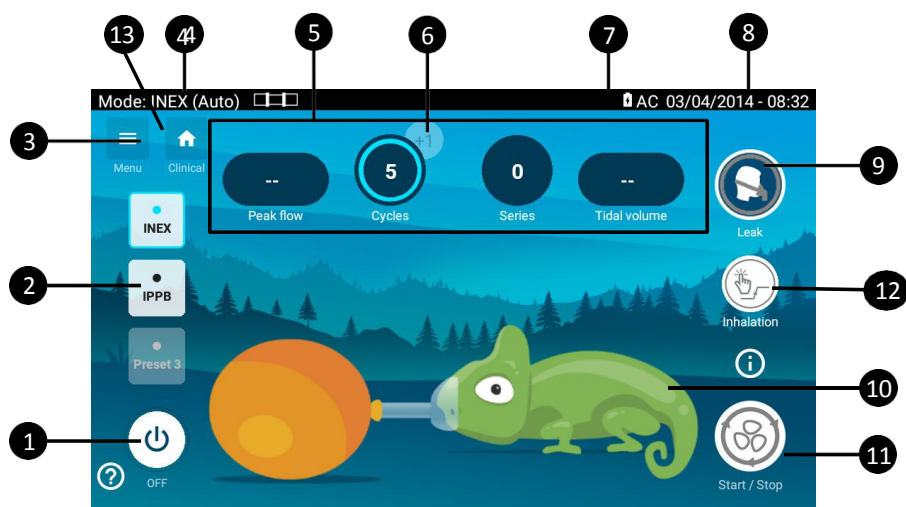


- | | |
|---|--|
| 1. Бутон за изключване на захранването | 7. Индикатор за живот на батерията: Показва нивото на оставащия заряд в батерията или дали батерията се зарежда. |
| 2. Меню на предварително зададените режими (1-3): Предварителни настройки, инсталирани от лекаря и достъпни за пациента, когато е необходимо. | 8. Дата: посочва датата във формат ГГГГ/ММ/ДД. Час: показва часа в 24-часов формат. Това може да бъде настроено и променено от менюто Предпочитания. |
| 3. Бутон Меню: Позволява достъп до екрана за пациента и клиничните менюта | 9. Индикатор за теч |
| 4. Индикатор за режима на терапия: INEX (ръчен/автоматичен) или IPPB | 10. Хамелеон: Анимация, която ще следва настроената в помощ на пациента терапия |
| 5. Наблюдение на терапията: извежда на екрана актуалната стойност за показаното наблюдение по време на терапията. | 11. Бутон : Започване/Спиране: за започване или спиране на терапията. |
| 6. Бутон за добавяне на цикъл: дава възможност за добавяне на цикъл към текущата терапия, ако е необходимо. | 12. Предизвикване на вдишване при терапия |
| | 13. Бърз достъп до клиничния екран |


Извършване на INEX терапия с функция за подпомагане

Конфигурирайте терапия INEX в автоматичен режим и започнете терапията. Анимациите на хамелеон и балон ще следва фазите на терапията:

- По време на вдишване хамелеонът се издува, а балонът се свива.

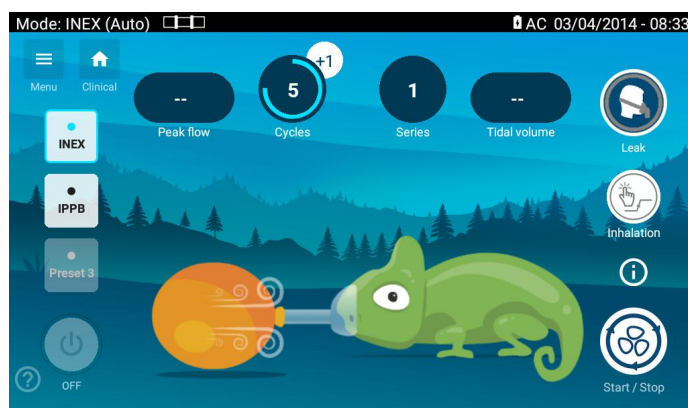

- По време на издишване хамелеонът се свива, а балонът се издува.

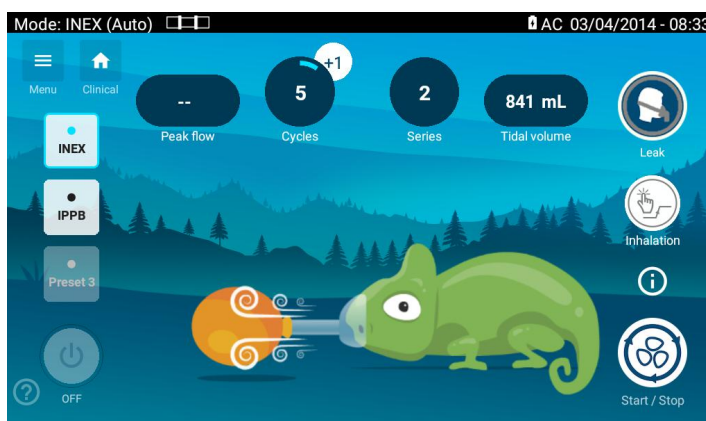


- По време на пауза хамелеонът и балонът са неподвижни.

Наблюдение:


- Максималната скорост на издишване се актуализира след всяко издишване
- Броячът на циклите намалява след всяко издишване. Той може да бъде увеличен с бутона „+1“ по време на последния цикъл.
- Броячът на сериите се увеличава при всяко започване на терапията. Той се нулира при промяна на предварителната настройка или при изключване на устройствата.
- Дихателният обем се актуализира след всяко вдишване
- Индикатор за теч: той ще стане оранжев в края на вдишването, ако има твърде голям теч при интерфейса на пациента и трябва да бъде регулиран по-добре. Това може също да означава, че инспираторното налягане е твърде късо, за да достигне зададеното инспираторно такова. Това може също да означава, че инспираторното време е твърде кратко, за да може белодробното налягане да достигне зададеното инспираторно налягане.

В края на серията (или при спиране на терапията с помощта на бутона за пропускане) ще се появи изскачащ прозорец с въпрос към пациента дали ще се извърши нова серия или не.

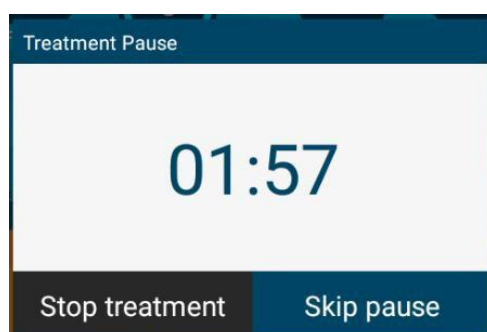

Хронометърът е ориентировъчен. Кликнете върху „Skip pause“ (Пропускане на паузата), за да започнете отново серията, или върху „Stop treatment“ (Спиране на терапията), за да спрете терапията.

Екран на функцията за подпомагане при IPPB терапия

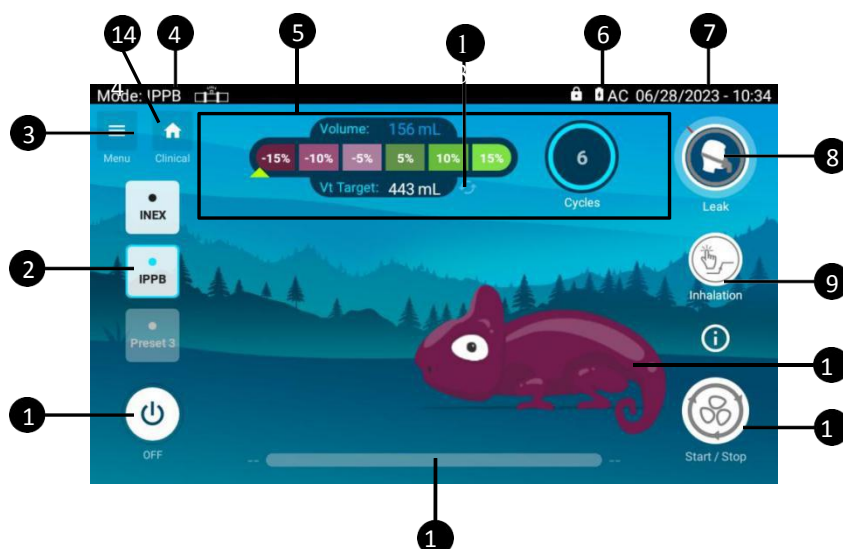

1. Бутон за изключване на захранването	8. Индикатор за изтичане
2. Меню на предварително зададените режими (1-3): Предварителни настройки, инсталирани от лекаря и достъпни за пациента, когато е необходимо.	9. Бутон за задействане: дава възможност за ръчно задействане на вдишване по време на терапия
3. Бутон Меню: Позволява достъп до екрана на пациента и клиничните менюта	10. Хамелеон: Анимация, която ще следва настроената в помощ на пациента терапия
4. Индикатор за режима на терапия: INEX (ръчен/автоматичен) или IPPB	11. Бутон : Започване/Спиране: за започване или спиране на терапията.
5. Наблюдение на терапията: извежда на екрана актуалната стойност за показаното наблюдение по време на терапията.	12. Индикатор за време на терапията: показва изминалото и оставащото време на терапията по време на терапия, когато лекарят е задал време на терапията.
6. Брой вдишвания	13. Нулиране на предварително зададения целеви обем
7. Дата и час с формат ГГГГ/ММ/ДД (може да се промени в менюто „Предпочитания“)	14. Бърз достъп до клиничния екран

Извършване на IPPB терапия с функция за подпомагане

Конфигурирайте IPPB терапия и започнете терапията. Според настройката на терапията вдишването може да бъде задействано от пациента или чрез специалния бутон.

Обемът показва развитието на обема в реално време по време на вдишването. Това наблюдение остава за обема на последното вдишване до следващото вдишване. Броячът на вдишванията се увеличава в началото на всяко вдишване. В края на всяко вдишване се оценяват изтичанията в интерфейса на пациента и индикаторът за изтичане  оранжев, ако има. Оранжевият цвят означава, че има твърде много изтичания в интерфейса на пациента и че той трябва да се настрои по-добре.

По време на вдишване хамелеонът се издува пропорционално на достигнатия начален обем. При достигане и превишаване на началния обем той постепенно се оцветява в зелено.

Ако настройката за начален обем е ИЗКЛ., за първите 3 вдишвания:

- Хамелеонът не се движи
- Началният обем остава неопределен

От първото вдишване, ако настройката за начален обем е ВКЛ., или след 3 вдишвания, ако настройката за начален обем е ИЗКЛ.:

- Определен е началният обем. Това е средната стойност на обема на трите първи вдишвания. Той остава непроменен до края на терапията.

По време на издишване хамелеонът постепенно се издува, докато достигне първоначалното положение и цвят. Той остава така до следващото вдишване. Стрелката на графичния индикатор на обема ще се движи пропорционално на достигнатия начален обем. Тя ще се задържи на достигнатото максимално ниво до следващото вдишване.

