

EOVE+




EO-70

Sekretionsmaskine (SMD)

Coaching-funktionen

INEX Coaching-skærm

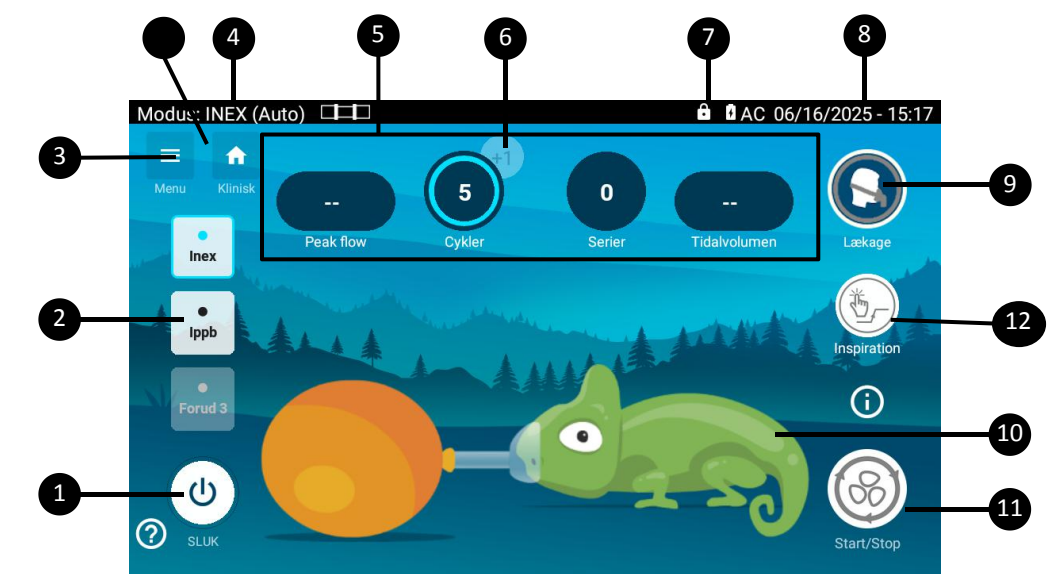


1. Sluk knap 2. Menu for forudindstillet tilstand (1-3): Forudindstillinger installeret af klinikerer og tilgængelige for patienten efter behov. 3. Menu-knap: Giver adgang til patientskærmen og kliniske menuer 4. Indikator for behandlingstilstand: INEX (manuel/Auto) eller IPPB 5. Monitorer for behandling: Viser værdier, der overvåges i realtid under behandlingen. 6. Knap til tilføjelse af cyklus: gør det muligt at tilføje en cyklus til den igangværende behandling, hvis det er nødvendigt.	7. Indikatorer for batteriets levetid: Viser, hvor meget strøm der er tilbage i batteriet, eller om batteriet er ved at blive opladet. 8. Dato: Angiver datoen i formatet ÅÅÅÅ/MM/DD. Tid: Angiver klokkeslættet i 24 timer. Dette kan indstilles og ændres fra menuen "Præferencer". 9. Lækageindikator 10. Kamæleon: Animation, som følger den behandling, der er sat op for at hjælpe patienten. 11. Start/Stop-knap: starter eller stopper behandlingen. 12. Udløser en inspiration under behandlingen 13. Genvej til klinisk skærm
---	---


Udførelse af INEX behandling med coaching funktion

Konfigurer en INEX Auto-behandling, og start behandlingen. Kamæleon- og ballonanimation vil følge behandlingsfaserne:

- Under inspiration pustes kamæleonen op, og ballonen tømmes for luft,

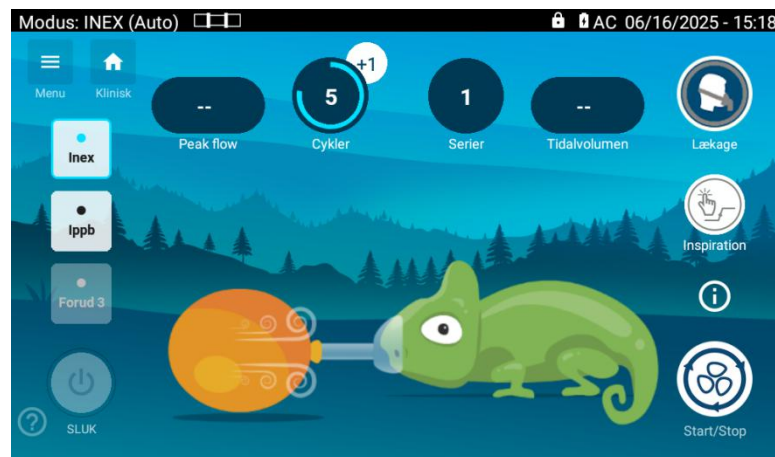

- Under udånding tømmes kamæleonen for luft, og ballonen pustes op.

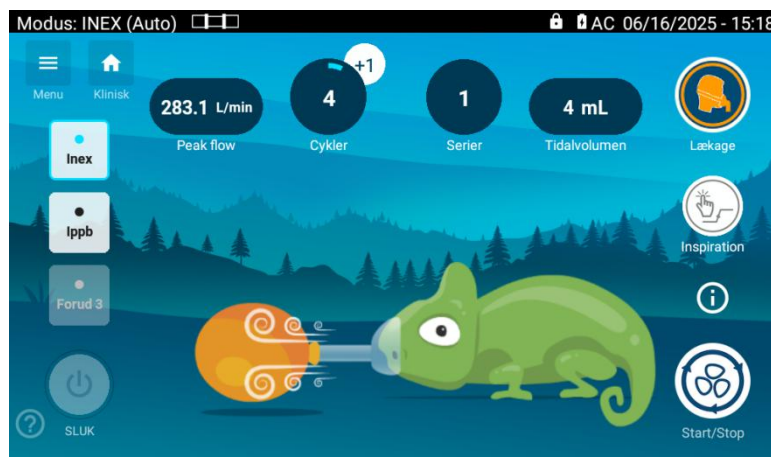


- I pausen bevæger kamæleonen og ballonen sig ikke.

Overvågningerne:


- Peakflowet opdateres efter hver expiration.
- Cyklustælleren reduceres efter hver expiration. Den kan øges med knappen "+1" under den sidste cyklus.
- Serietælleren øges ved hver behandlingsstart. Den nulstilles, når forudindstillingen ændres, eller apparatet slukkes.
- Tidalvolumen opdateres efter hver inspiration
- Lækageindikatoren bliver orange i slutningen af indåndingen, hvis trykket ved slutningen af indåndingen ikke når 80 % af det indstillede tryk. Den første årsag kunne være tilstedeværelsen af større lækager ved patientgrænsefladen. En anden årsag kunne også være, at indåndingstiden er for lavt til, at lungetrykket kan nå det indstillede indåndingstryk.

Ved afslutningen af serien (eller når behandlingen stoppes med knappen Spring over), vises en pop op, der spørger patienten, om der skal udføres en ny serie eller ej.

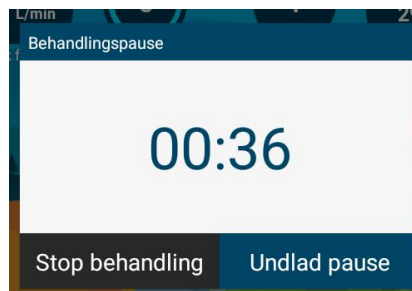

Uret er vejledende. Klik på «Spring pause over» for at genstate en serie eller på «Stop behandling» for at afslutte behandlingen.

IPPB Coaching-skærm

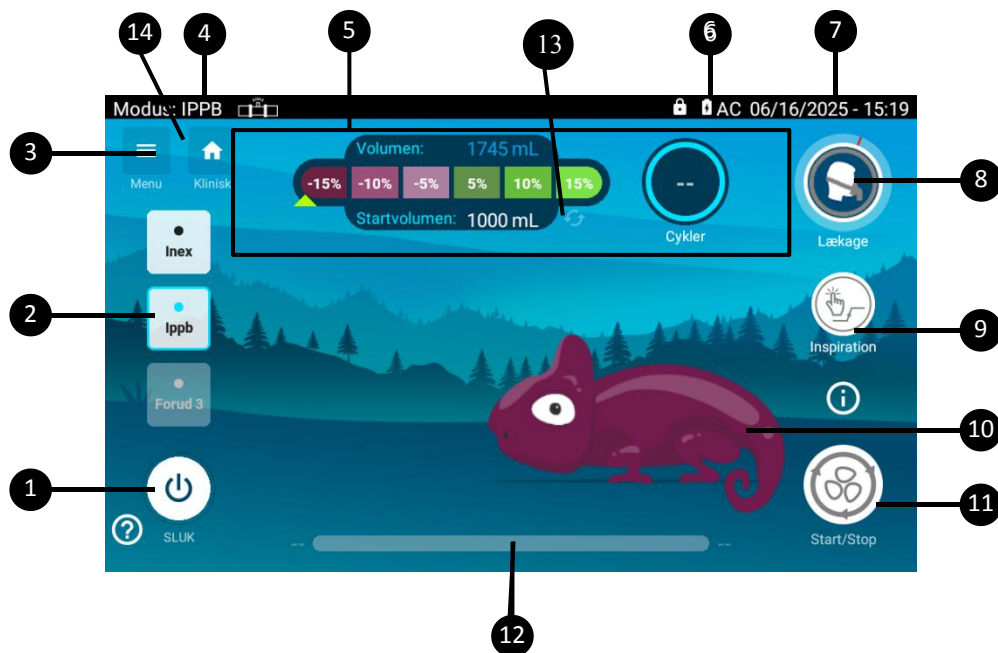

1. Sluk - knap 2. Menu for forudindstillet tilstand (1-3): Forudindstillinger installeret af kliniker og tilgængelige for patienten efter behov. 3. Menu-knap: Giver adgang til patientskærmen og kliniske menuer 4. Indikator for behandlingsmodus: INEX (manuel/Auto) eller IPPB 5. Behandlingsovervågning: viser "live"-værdien for den viste overvågning under behandlingen. 6. Antal respirationer 7. Dato og klokkeslæt med formatet ÅÅÅÅ/MM/DD (kan ændres i menuen "præferencer")	8. Indikator for lækage 9. Trigger-knap: gør det muligt manuelt at udløse en inspiration under en behandling. 10. Kamæleon: Animation, der følger den indstillede behandling for at hjælpe patienten. 11. Start/Stop-knap: starter eller stopper behandlingen. 12. Behandlingstidsbjælke: viser den forløbne og den resterende behandlingstid under behandlingen, når en behandlingstid er indstillet af kliniker. 13. Nulstilling af den tidligere definerede "target volume" 14. Genvej til klinisk skærm
---	---

Udførelse af IPPB-behandling med Coaching funktion

Konfigurer en IPPB-behandling, og start behandlingen. Når behandlingen er gjort klar, kan inspirationen enten udløses af patienten eller ved hjælp af den dedikerede knap.

Volumen viser volumenudviklingen "live" under inspirationen. Denne overvågning forbliver på den endelige inspirationsvolumen indtil næste inspiration. Respirationstælleren øges ved begyndelsen af hver inspiration. I slutningen af hver inspiration evalueres lækagerne i patient interfacen (maske

eller mundstykke), og lækageindikatoren  bliver orange, hvis der er for stor utæthed ved patientgrænsefladen, og derfor bør den justeres bedre.

Under pustes kamæleon op i forhold til andelen af det nåede startvolumen. Den bliver gradvist grøn, når den når og overskrider startvolumenet.

Hvis indstilling for startvolumen er Sluk: for de 3 første indåndinger:

- Kamæleon bevæger sig ikke
- Startvolumen forbliver udefineret

Fra den første indånding, hvis indstilling for startvolumen er TIL, eller efter 3 indåndinger Hvis indstilling for startvolumen er Sluk:

- Startvolumen er defineret. Det er gennemsnittet af volumen af de 3 første inspirationer. Det forbliver uændret, indtil behandlingen afsluttes.

Under expirationen tømmes kamæleon gradvist for luft, indtil den når sin oprindelige position og farve. Sådan forbliver den indtil næste inspiration. Pilen på bjælke diagrammet for volumen vil flytte sig i forhold til andelen af det nåede startvolumen. Det vil forblive på det maksimale niveau, der er nået, indtil næste indånding.

