




EO-70

Juhendamisfunktsiooni
kasutusjuhend

INEX juhendamise ekraan

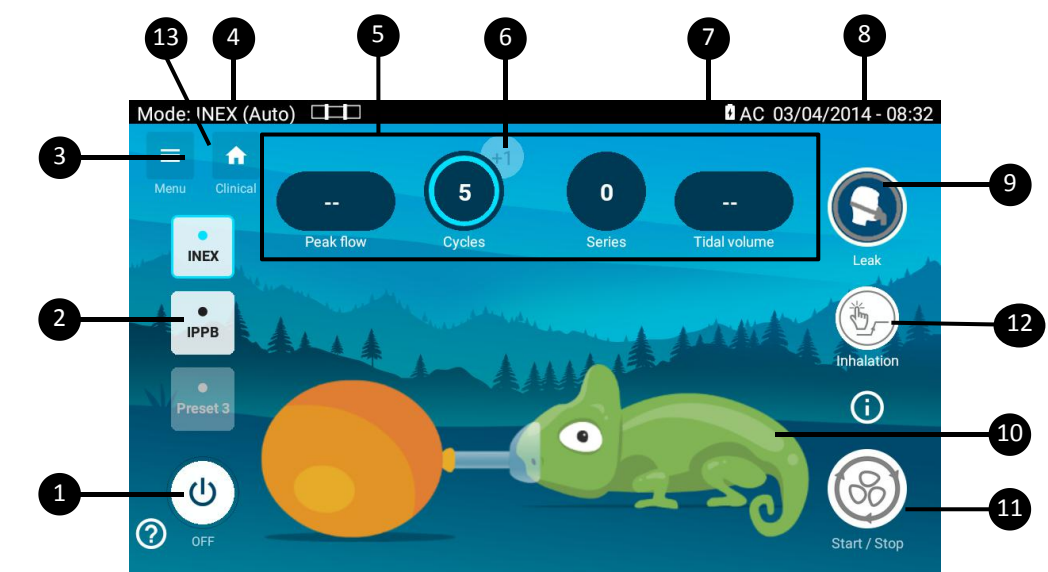


- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Väljalülitamise nupp 2. Eelseadistuste menüü (1–3): Arsti poolt seadistatud eelseadistused, millele patsiendil on vajadusel juurdepääs. 3. Menüü nupp: Võimaldab avada patsiendivaate ja kliinilised menüüd. 4. Ravirežiimi indikaator: INEX (käsitsi / automaatne) või IPPB 5. Ravi jälgimine: Kuvab reaajas väärtused ravi ajal jälgitavate parameetrite kohta. 6. Tsükli lisamise nupp: Võimaldab vajadusel lisada ravi käigus ühe tsükli. | <ol style="list-style-type: none"> 7. Aku laetuse indikaatorid: Näitavad aku järelejäänud laetust või kas aku laeb. 8. Kuupäev ja kellaaeg: Näitab kuupäeva formaadis AAAA/KK/PP. Kellaaeg: Näitab aega 24-tunnises formaadis. Seda saab seadistada ja muuta <i>Preferences</i> (eelistuste) menüüst. 9. Lekkeindikaator 10. Kameeleon: Animatsioon, mis järgib ravi seadistusi, et aidata patsiendil paremini kaasa töötada. 11. Alustamise/Lõpetamise nupp: Käivitab või peatab ravi. 12. Sissehingamise käivitamine ravi ajal. 13. Otsetee kliinilisele ekraanile. |
|---|--|


INEX-ravi tegemine juhendamisfunktsiooniga

Seadistage INEX Auto ravi ja alustage ravi. Kameeleoni ja õhupalli animatsioon järgib ravi faase:

- Sissehingamise ajal kameeleon paisub ja õhupall tühjeneb.

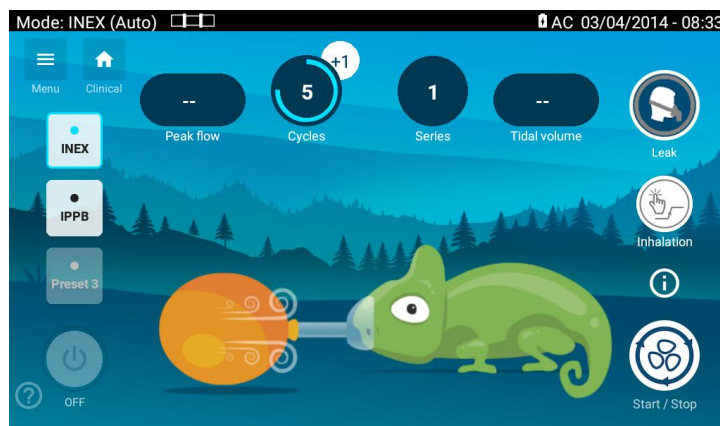

- Väljahingamise ajal kameeleon tühjeneb ja õhupall täitub.

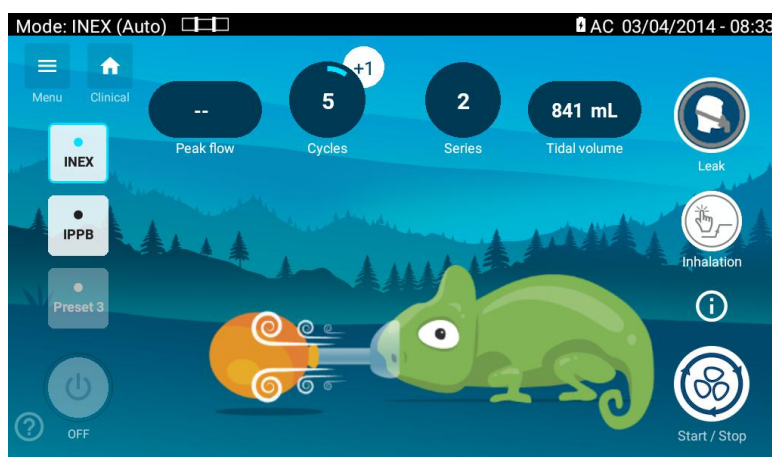


- Pausi ajal kameeleon ja õhupall ei liigu.

Jälgitavad näidud:


- *Peak flow* (tippvool) uuendatakse pärast iga väljahingamist.
- Tsüklite loendur väheneb iga väljahingamise järel. Seda saab suurendada «+1» nupuga viimase tsükli ajal.
- Seeriade loendur suureneb iga ravi alustamisel. See lähtestub eelseadistuse vahetamisel või seadme väljalülitamisel.
- *Tidal volume* (hingamismaht) uuendatakse pärast iga sissehingamist
- *Leak indicator* (lekkeindikaator): kui patsiendi liideses on liiga suur lekk, muutub indikaator sissehingamise lõpus oranžiks ja seda tuleb paremini reguleerida. See võib tähendada ka seda, et sissehingamisrõhk on liiga lühike, et saavutada seatud sissehingamisrõhk. See võib tähendada ka seda, et sissehingamisaeg on liiga lühike, et kopsurõhk saavutaks seatud sissehingamisrõhu.

Seeria lõpus (või kui ravi katkestatakse *Skip* (jätta vahele) nupu abil) kuvatakse hüpikaken, mis küsib patsiendilt, kas soovitakse alustada uut seeriat.

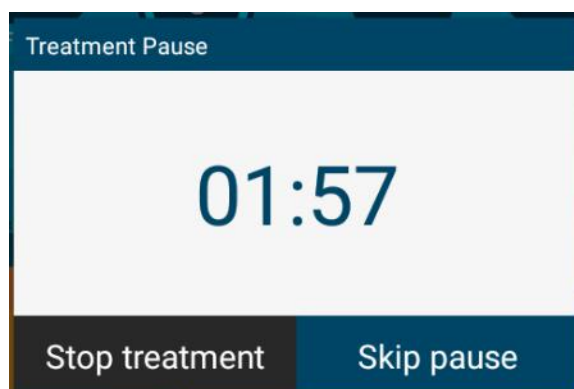

Kuvatav stopper on ainult suunis. Vajutage «*Skip pause*» (jätta paus vahele), et alustada uut seeriat, või «*Stop treatment*» (lõpeta ravi), et ravi lõpetada.

IPPB juhendamise ekraan

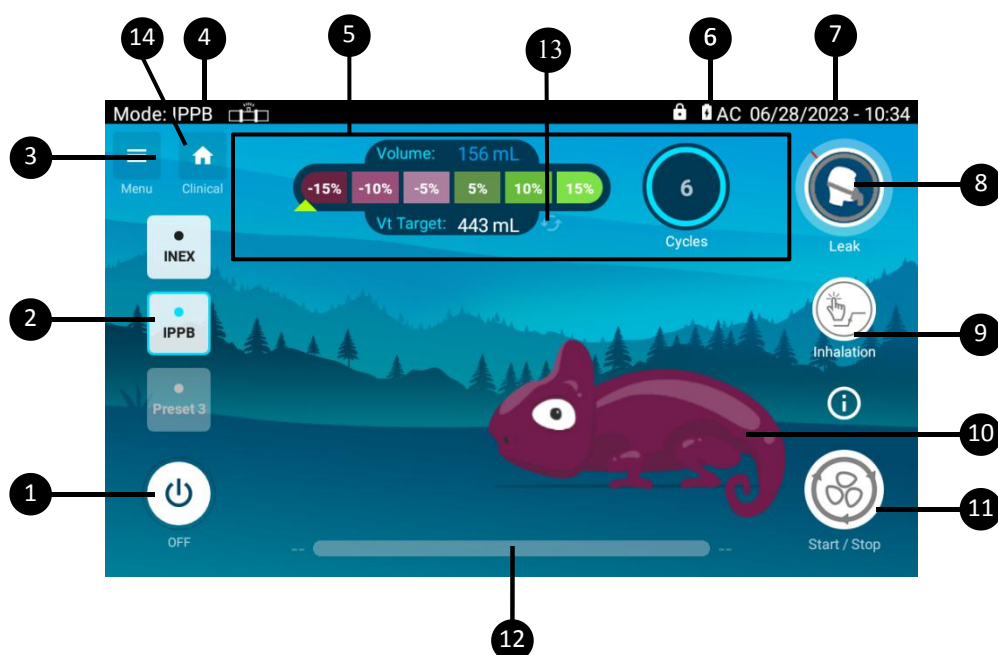

1. Väljalülitamise nupp	8. Lekkeindikaator
2. Eelseadistuste menüü (1–3): Arsti poolt seadistatud eelseadistused, millele patsiendil on vajadusel juurdepääs.	9. Käivitamisnupp: Võimaldab ravi ajal manuaalselt käivitada sissehingamise.
3. Menüü nupp: Võimaldab pääseda patsiendi ja kliinilistesse menüüdesse.	10. Kameeleon: Animatsioon, mis jälgib ravi seadistusi, et aidata patsiendil paremini kaasa töötada.
4. Ravirežiimi indikaator: INEX (käsitsi / automaatne) või IPPB.	11. Alustamise/lõpetamise nupp: Käivitab või peatab ravi.
5. Ravi jälgimine: Kuvab ravi ajal jälgitava parameetri reaajas väärtuse.	12. Ravi ajariba: Kuvab ravi ajal möödunud ja järelejäänud aja, kui ravi kestus on arstiga eelnevalt määratud.
6. Hingetõmmete arv	13. Varem määratud sihtmahu lähtestamine
7. Kuupäev ja kellaaeg vormingus AAAA/KK/PP (muudetav eelistuste menüüs)	14. Otsetee kliinilisele ekraanile

IPPB-ravi tegemine juhendamisfunktsiooniga

Seadistage IPPB-ravi ja alustage ravi. Vastavalt raviseadistusele saab sissehingamist käivitada kas patsient ise või spetsiaalse nupu abil.

Volume (maht) näitab sissehingamise ajal reaajas mahu muutumist. See näit jääb ekraanile kuni järgmise sissehingamiseni. Hingetõmmete loendur suureneb iga sissehingamise alguses. Iga sissehingamise lõpus hinnatakse patsiendiliidese lekkeid ning lekkeindikaator  muutub oranžiks, kui patsiendiliidises on liiga suur leke ning see tuleks paremini kohandada.

Sissehingamise ajal paisub kameeleon vastavalt sellele, kui palju mahust on saavutatud. Kui maht on saavutatud või ületatud, muutub kameeleon järk-järgult roheliseks.

Kui algse mahu seadistus on *OFF* (VÄLJAS), siis esimese 3 sissehingamise ajal:

- Kameeleon ei liigu
- Algmaht jääb määratlemata

Alates esimesest sissehingamisest, kui algse mahu seadistus on *ON* (SEES) või pärast 3 sissehingamist, kui algse mahu seadistus on *OFF* (VÄLJAS):

- Algmaht on määratletud. See on esimese 3 sissehingamise mahu keskmine. See jääb muutumatuks kuni ravi lõpuni.

Väljahingamise ajal tühjeneb kameeleon järk-järgult, kuni jõuab algasendisse ja algvärvini. Ta jääb sellesse olekusse kuni järgmise sissehingamiseni. Mahuriba nool liigub vastavalt sellele, kui suur osa mahust on saavutatud. See jääb näitama maksimaalset saavutatud taset kuni järgmise sissehingamiseni.

