



EO-70

Función Coaching


Guía del usuario

Activar la función Coaching

El usuario puede acceder a la pantalla Coaching para hacer un tratamiento que el personal médico ha guardado previamente en un preajuste.


NOTA:	La función Coaching solo está disponible para los preajustes que contienen tratamientos en modo INEX Auto o en modo IPPB.
--------------	---

En la pantalla del modo clínico, pulsa  para ver la pantalla «Función de coaching»

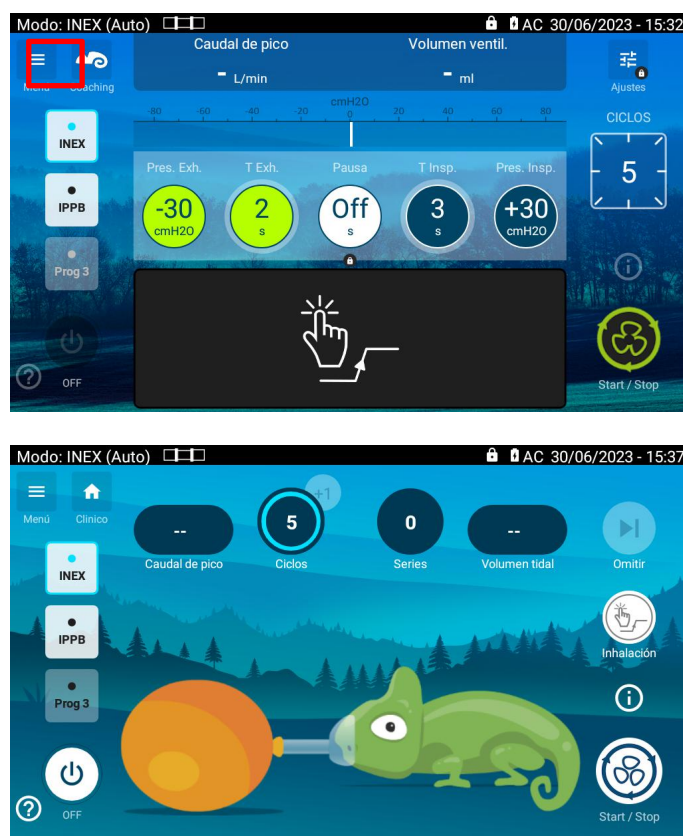

NOTA:	El modo Coaching no está disponible para todos los modos de tratamiento. Un mensaje indicará si falta algo para activar el modo.
	Si el mensaje en pantalla indica que ninguno de los preajustes disponibles es compatible, contacta con tu médico.

Cambiar de programa en la pantalla Coaching

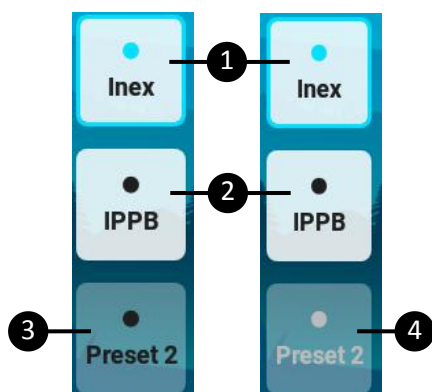


1. Preajuste activado
2. Preajuste activable
3. Preajuste inactivo (no disponible para Coaching)
4. Preajuste vacío

Para cambiar de preajuste, haz clic en el preajuste deseado.

Si hay un tratamiento en curso, no se puede cambiar de preajuste.

Pantalla Coaching en INEX

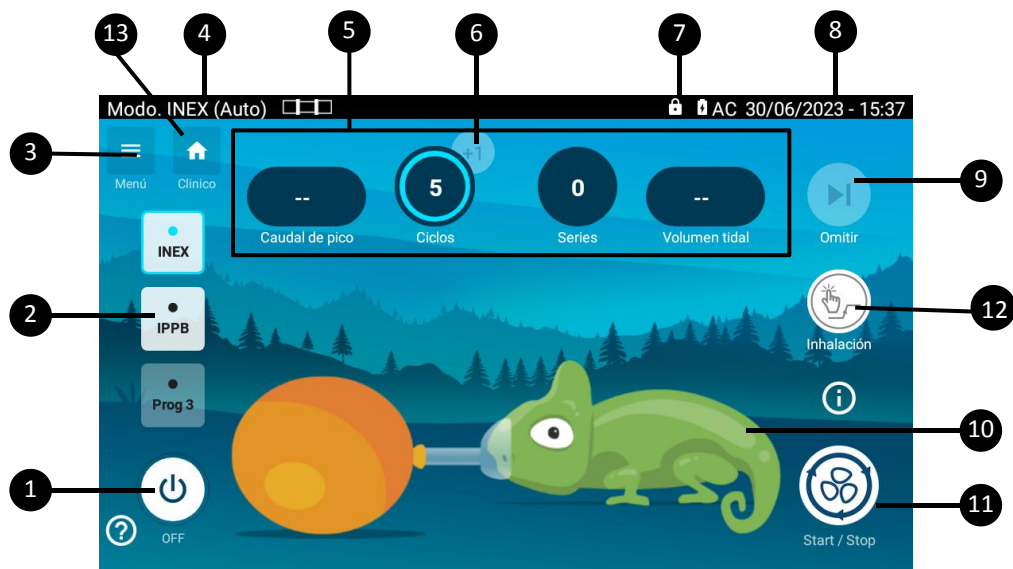


- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Botón de apagado 2. Preajustes (1-3): preajustes accesibles para el paciente. 3. Botón Menú: da acceso a diferentes menús 4. Indicador de modo de tratamiento: INEX (manual/auto) o IPPB 5. Monitorización del tratamiento: muestra los valores monitorizados en tiempo real durante el tratamiento. 6. Botón de adición de ciclo: permite añadir un ciclo al tratamiento en curso, si es necesario. 7. Indicador de carga de la batería: indica el nivel de carga de la batería o si la batería está en carga. | <ol style="list-style-type: none"> 8. Fecha y hora: indica la fecha en formato AAAA/MM/DD y la hora en formato de 24 h. Estos formatos pueden modificarse en el menú Preferencias. 9. Botón "Omitir": permite detener una serie INEX en curso antes de la finalización de los ciclos. 10. Camaleón: animación que se muestra tras la configuración del tratamiento para ayudar al paciente. 11. Botón Start/Stop: pone en marcha o detiene el tratamiento. 12. Botón de activación: permite desencadenar manualmente una inspiración durante un tratamiento. 13. Acceso directo a la pantalla clínica. |
|--|--|

Uso de la función Coaching para un tratamiento en modo INEX


Selecciona un preajuste en INEX Auto e inicia el tratamiento.

El camaleón y el globo seguirán las diferentes fases del tratamiento:

- Durante la inspiración, el camaleón se hincha y el globo se deshincha.

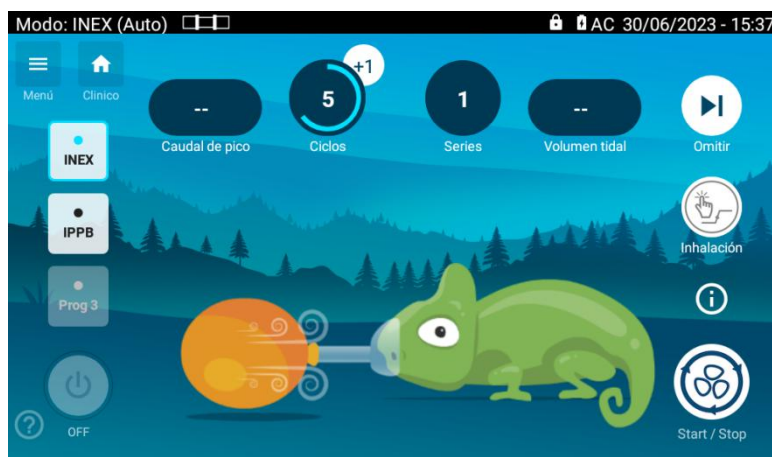

- Durante la espiración, el camaleón se deshincha y el globo se hincha.

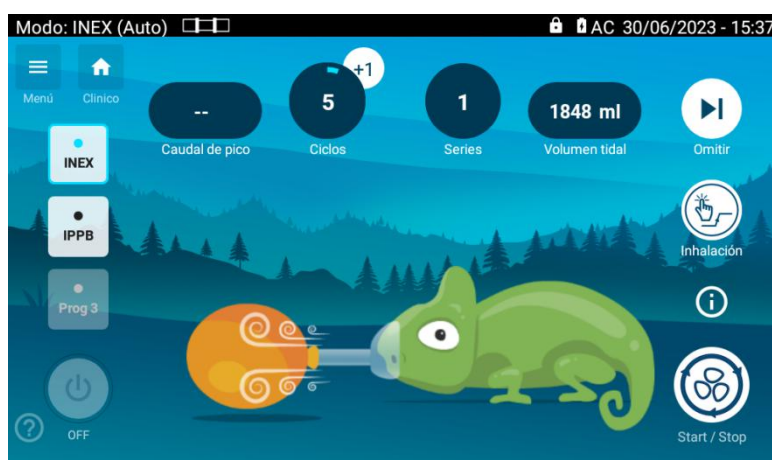

- Durante la pausa, ni el camaleón ni el globo se mueven.

Monitorizaciones:


- El flujo máximo se actualiza después de cada espiración.
- El contador de ciclos disminuye después de cada espiración. Durante el último ciclo, este valor se puede aumentar con el botón “+1”.
- El contador de series aumenta tras cada inicio de tratamiento. Al modificar el preajuste y al apagar el aparato, este contador se vuelve a poner a cero.
- El volumen corriente se actualiza después de cada inspiración.

Al final del tratamiento (o al detener el tratamiento con el botón “Omitir”), aparecerá una ventana para preguntar al paciente si va a hacer otra serie, o no.



El cronómetro es indicativo. Pulsa “Saltar descanso” para retomar una serie o “Parar tratamiento” para interrumpir el tratamiento.

Pantalla Coaching en IPPB

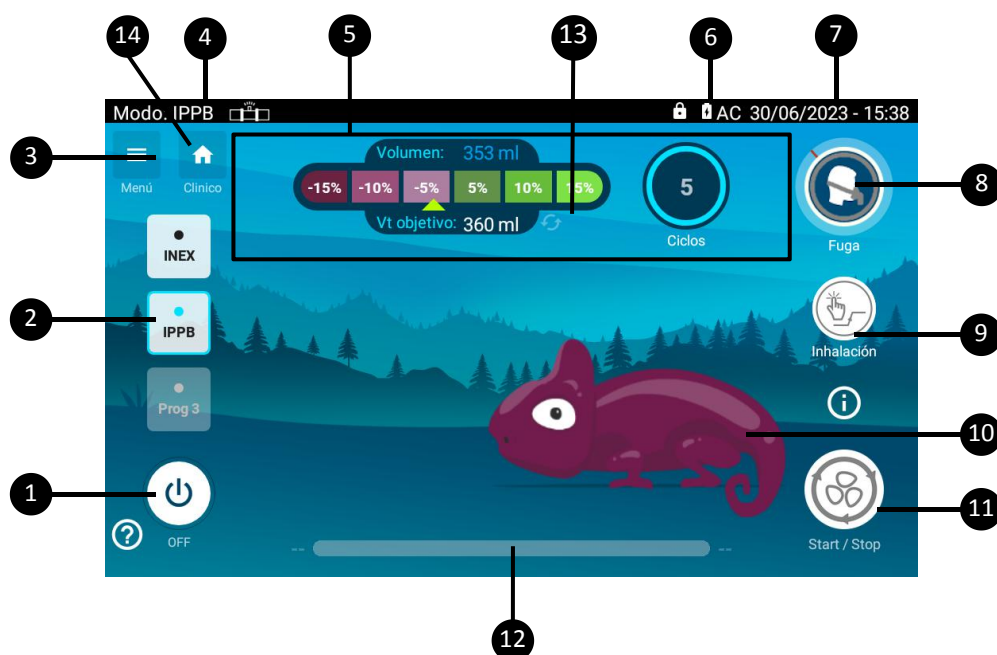

1. Botón de apagado
2. Preajustes (1-3): preajustes accesibles para el paciente.
3. Botón Menú: da acceso a diferentes menús
4. Indicador de modo de tratamiento: INEX (manual/auto) o IPPB
5. Monitorización del tratamiento: muestra los valores monitorizados en tiempo real durante el tratamiento.
6. Indicador de carga de la batería: indica el nivel de carga de la batería o si la batería está en carga.
7. Fecha y hora: indica la fecha en formato AAAA/MM/DD y la hora en formato de 24 h. Estos formatos pueden modificarse en el menú Preferencias.

8. Indicador de fuga
9. Botón de activación: permite desencadenar manualmente una inspiración durante un tratamiento.
10. Camaleón: animación que se muestra tras la configuración del tratamiento para ayudar al paciente.
11. Botón Start/Stop: pone en marcha o detiene el tratamiento.
12. Barra de tiempo de tratamiento: muestra el tiempo de tratamiento transcurrido y el tiempo de tratamiento que queda
13. Restablecimiento del volumen objetivo definido previamente
14. Acceso directo a la pantalla clínica

Uso de la función Coaching para un tratamiento IPPB

Selecciona un preajuste en modo IPPB e inicia el tratamiento. Después de la configuración, la inspiración se puede desencadenar de dos maneras: puede desencadenarla el paciente o bien se puede utilizar el botón para tal efecto.

La monitorización del volumen muestra la evolución en directo del volumen durante la inspiración. Esta monitorización se mantiene en el valor del volumen final hasta la siguiente inspiración. El valor del contador de ciclos aumenta al inicio de cada inspiración.

Al final de cada inspiración, se evalúan las fugas de la interfaz y el indicador de fuga  cambia a verde o naranja. Si es de color naranja, significa que hay demasiadas fugas en la interfaz del paciente y que hay que ajustarla mejor.

Durante la inspiración, el camaleón se hincha de manera proporcional al volumen objetivo alcanzado. A medida que se alcanza y se supera el volumen objetivo, el camaleón cambia progresivamente de color hasta volverse verde.

En las 3 primeras inspiraciones:

- El camaleón no se mueve
- La monitorización del volumen objetivo se mantiene indefinida

A partir de la tercera inspiración:

- Se define el volumen objetivo, que corresponde al volumen medio de las 3 primeras inspiraciones.

Este valor no se modifica hasta el final del tratamiento.

Durante la espiración, el camaleón se deshinchará progresivamente hasta volver al tamaño y al color iniciales, y se quedará así hasta la siguiente inspiración.

La flecha de la gráfica de volumen se moverá de manera proporcional al volumen objetivo conseguido. Esta se mantiene en el nivel máximo alcanzado hasta la siguiente inspiración.

