



AC-70

Fonction Coaching



Guide de l'utilisateur

Activer la fonction Coaching

L'utilisateur peut aller sur l'écran Coaching pour faire un traitement qui a été préalablement sauvegardé dans un préréglage par le personnel médical.


NOTE:	La fonction Coaching n'est disponible que pour les préréglages contenant des traitements en mode INEX Auto ou en mode IPPB.
--------------	---

Depuis l'écran clinique, cliquer sur  pour afficher l'écran «Fonction Coaching»

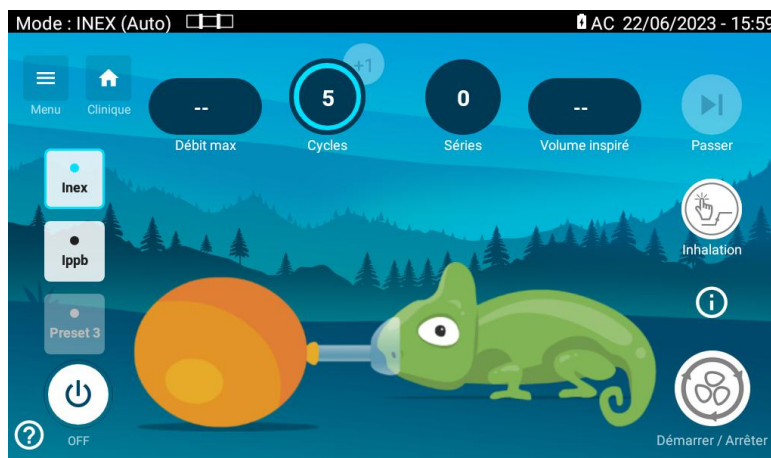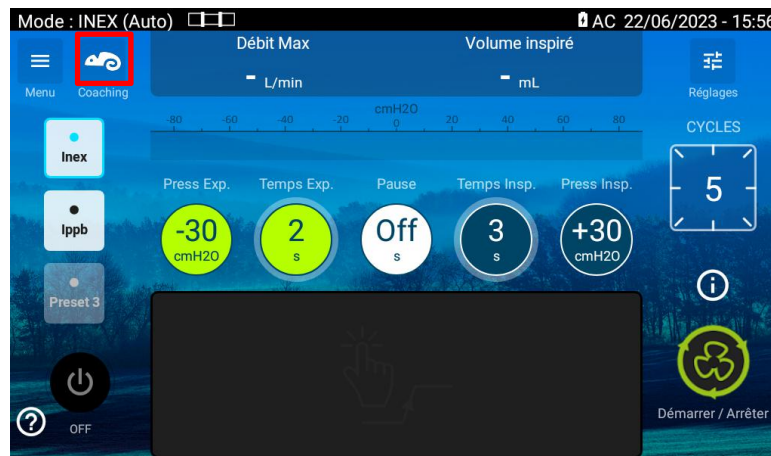

NOTE:	La fonction Coaching n'est pas utilisable avec tous les modes de traitement. Un message indiquera si quelque chose manque pour activer la fonction.
	Si le message sur l'écran indique qu'aucun des préréglages disponibles n'est compatible, contacter votre clinicien.

Changer de preset sur l'écran Coaching

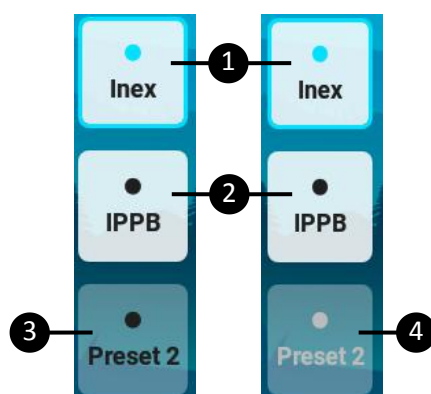


1. Préréglage activé
2. Préréglage activable
3. Préréglage inactif (pas disponible pour le Coaching)
4. Préréglage vide

Pour changer de préréglage, cliquer sur le préréglage désiré.

Si un traitement est en cours, il n'est pas possible de changer de préréglage.

L'écran Coaching en INEX

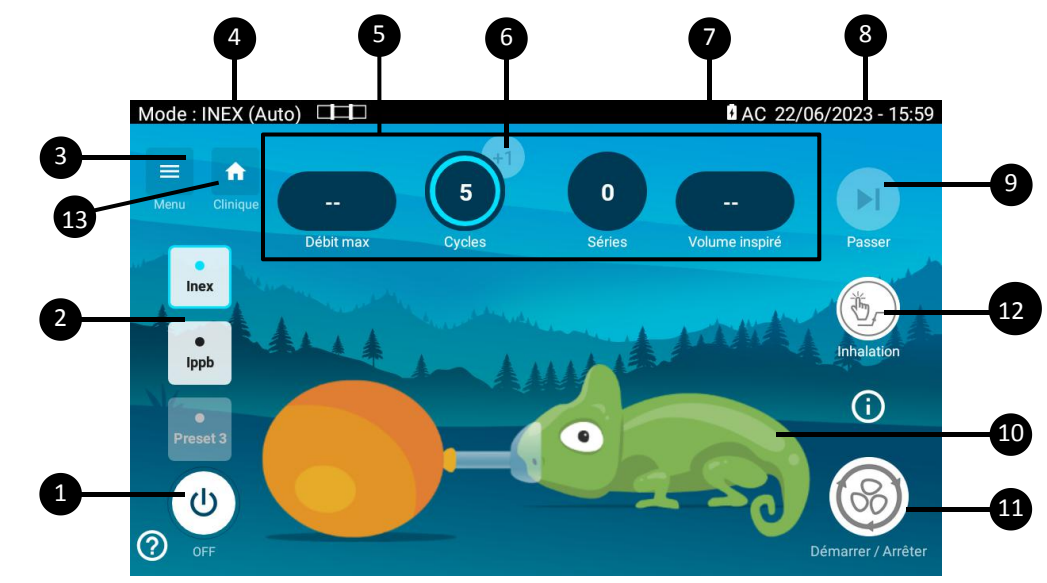


1. Bouton d'extinction 2. Préréglages (1-3) : Préréglages accessibles au patient. 3. Bouton menu : Donne accès aux différents menus 4. Indicateur de mode de traitement: INEX (manuel/Auto) ou IPPB 5. Monitorages de traitement: affiche les valeurs monitorées en temps réel pendant le traitement. 6. Bouton d'ajout de cycle: permet d'ajouter un cycle au traitement en cours si nécessaire. 7. Témoin d'autonomie batterie: indique le niveau de charge restant dans la batterie ou si la batterie est en charge.	8. Date et heure: indique la date au format AAAA/MM/JJ et l'heure au format 24h. Ils peuvent être changés depuis le menu préférences. 9. Bouton «Passer»: permet de stopper une série INEX en cours avant la fin des cycles. 10. Caméléon: Animation qui suit le traitement paramétré pour aider le patient. 11. Bouton arrêt / démarrage: démarre ou arrête le traitement. 12. Bouton Trigger: permet de déclencher manuellement une inspiration pendant un traitement. 13. Raccourci pour l'écran clinique
---	---


Utilisation de la fonction Coaching pour réaliser un traitement en mode INEX

Sélectionner un préréglage en INEX Auto et démarrer le traitement. Le caméléon et le ballon vont suivre les différentes phases de traitement :

- Pendant l'inspiration, le caméléon gonfle et le ballon dégonfle.

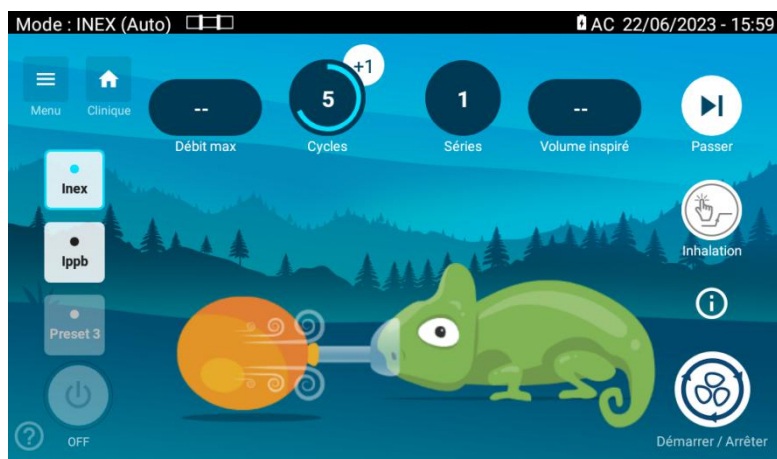

- Pendant l'expiration, le caméléon dégonfle et le ballon gonfle.

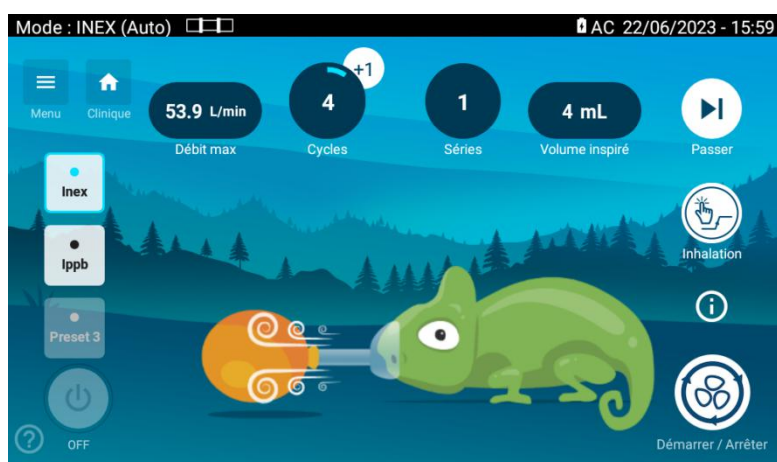


- Pendant la pause, le caméléon et le ballon ne bougent pas.

Les monitorages:


- Le débit de pointe est mis à jour après chaque expiration.
- Le décompte de cycle diminue après chaque expiration. Il peut être incrémenté avec le bouton «+1» pendant le dernier cycle.
- Le compteur de série est incrémenté après chaque démarrage de traitement. Il est remis à zéro au changement de préréglage et à l'arrêt de l'appareil.
- Le volume est mis à jour après chaque inspiration.

A la fin du traitement (ou à l'arrêt du traitement par le bouton «Passer»), une fenêtre va apparaître pour demander au patient si une nouvelle série va être réalisée ou non.

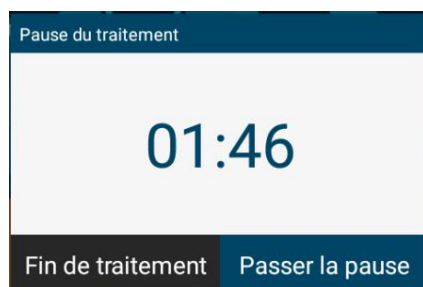

Le chronomètre est indicatif. Cliquer sur «Passer la pause» pour redémarrer une série ou sur «Fin de traitement» pour arrêter le traitement.

L'écran Coaching en IPPB

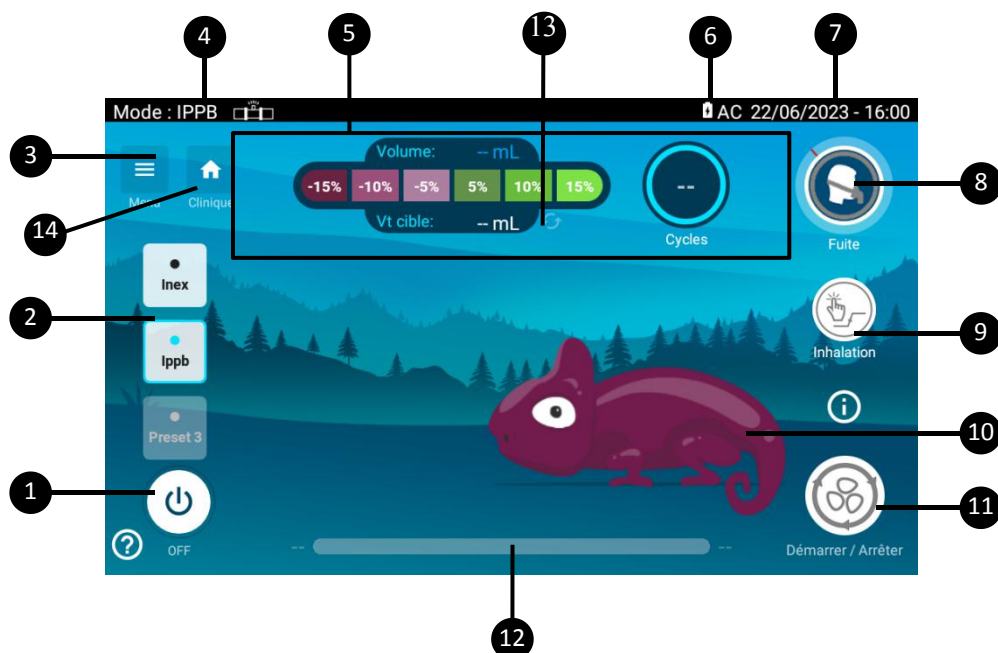

1. Bouton d'extinction 2. Préréglages (1-3) : Préréglages accessibles au patient. 3. Bouton menu : Donne accès aux différents menus 4. Indicateur de mode de traitement: INEX (manuel/Auto) ou IPPB 5. Monitorages de traitement: affiche les valeurs monitorées en temps réel pendant le traitement. 6. Témoin d'autonomie batterie: indique le niveau de charge restant dans la batterie ou si la batterie est en charge. 7. Date et heure: indique la date au format AAAA/MM/JJ et l'heure au format 24h. Ils peuvent être changés depuis le menu préférences.	8. Indicateur de fuite 9. Bouton Trigger: permet de déclencher manuellement une inspiration pendant un traitement. 10. Caméléon: Animation qui suivra le traitement paramétré pour aider le patient 11. Bouton arrêt démarrage: démarre ou arrête le traitement. 12. Barre de temps de traitement: affiche le temps de traitement passé et le temps de traitement restant 13. Réinitialisation du volume cible précédemment défini 14. Raccourci pour l'écran clinique
---	--

Utilisation de la fonction coaching pour réaliser un traitement IPPB

Sélectionner un préréglage en mode IPPB et démarrer le traitement. Suivant le paramétrage, l'inspiration peut soit être déclenchée par le patient, soit en utilisant le bouton dédié.

Le monitoring du Volume montre l'évolution en direct du volume durant l'inspiration. Ce monitoring reste à la valeur du volume final jusqu'à la prochaine inspiration. Le compteur de cycle est incrémenté au début de chaque inspiration.

À la fin de chaque inspiration, les fuites de l'interface sont évaluées et l'indicateur de fuite  devient vert ou orange. Un indicateur orange indiquera qu'il y a trop de fuite à l'interface patient et qu'elle doit être mieux ajustée.

Pendant l'inspiration, le caméléon gonflera en suivant la proportion du volume cible atteinte. Il changera progressivement de couleur vers le vert, quand le volume atteindra et dépassera le volume cible.

Pour les 3 premières inspirations:

- Le caméléon ne bouge pas
- Le monitoring Volume Cible reste indéfini

Après 3 inspirations:

- le Volume Cible est défini. C'est le volume moyen des 3 premières inspirations. Il reste inchangé jusqu'à la fin du traitement.

Pendant l'expiration, le caméléon dégonflera progressivement jusqu'à revenir à la taille et à la couleur de départ. Il restera ainsi jusqu'à la prochaine inspiration. La flèche du graphique de volume bougera suivant la proportion du volume cible atteinte. Elle restera au niveau maximum atteint jusqu'à la prochaine inspiration.

