




EO-70

Uređaj za upravljanje sekretima
Omogućavanje funkcije

Zaslon obuku načina rada INEX

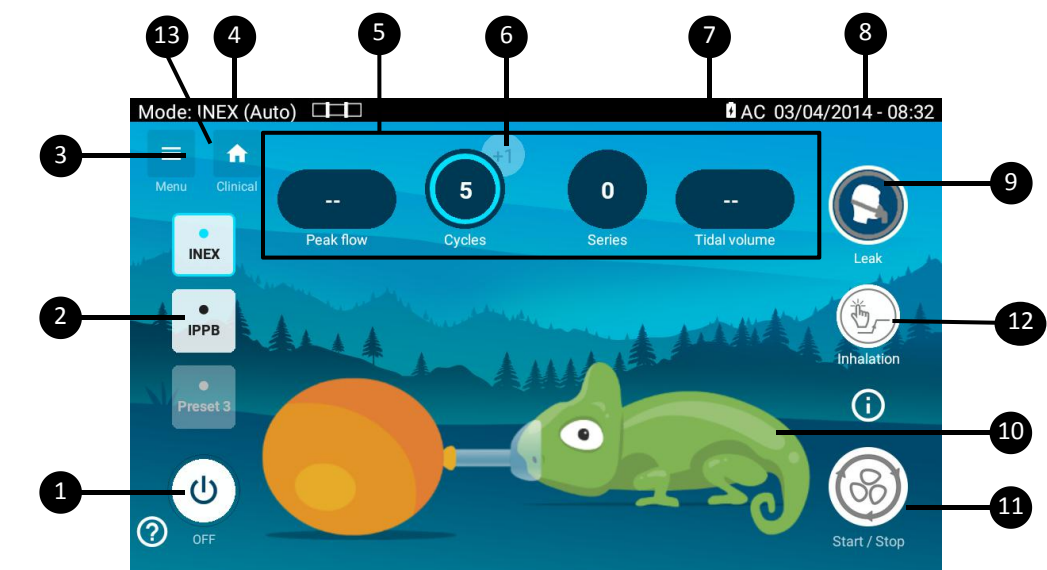


1. Tipka za uključenje/isključenje	7. Indikatori vijeka trajanja baterije: Označava razinu napunjenosti baterije ili puni li se baterija.
2. Izbornik unaprijed postavljenog načina rada (1-3): Unaprijed postavljene postavke postavio je zdravstveni djelatnik i dostupne su pacijentu kada je to potrebno.	8. Datum: označava datum u formatu GGGG/MM/DD. Vrijeme: Označava vrijeme na 24-satnom satu. To se može postaviti i promijeniti u izborniku Postavke.
3. Tipka izbornika: Omogućuje pristup zaslonu pacijenta i kliničkim izbornicima.	9. Indikator curenja
4. indikator načina terapije: INEX (ručno/automatsko) ili IPPB	10. Kameleon: Animacija koja će pratiti terapiju postavljenu kako bi pomogla pacijentu
5. praćenje terapije: prikazati vrijednost uživo za prikazano praćenje tijekom terapije.	11. Tipka za pokretanje/zaustavljanje: započinje ili zaustavlja terapiju.
6. Tipka za dodavanje ciklusa: dopušta dodavanje ciklusa tekućoj terapiji ako je potrebno	12. Pokreće udah tijekom terapije
	13. Prečac kliničkog zaslona


Provođenje INEX terapije s funkcijom Obuke

Podesite INEX Auto terapiju i započnite terapiju. Animacija kameleona i balona pratit će faze terapije:

- Tijekom udaha, kameleon se napuhuje, a balon ispuhuje

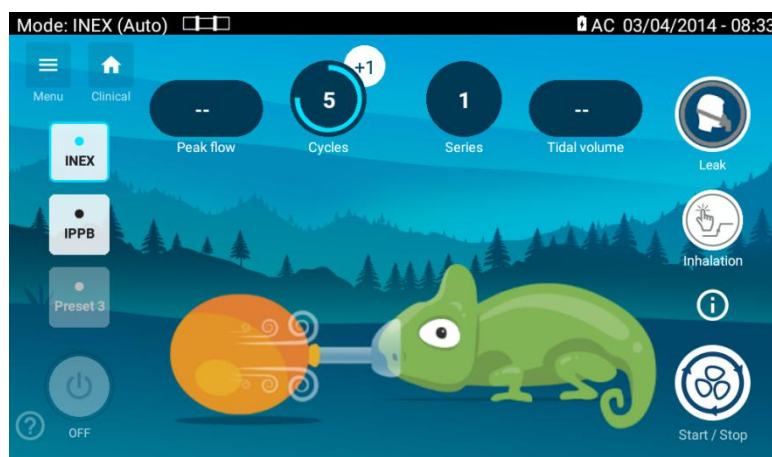

- Tijekom izdaha, kameleon se ispuhuje, a balon se napuhuje

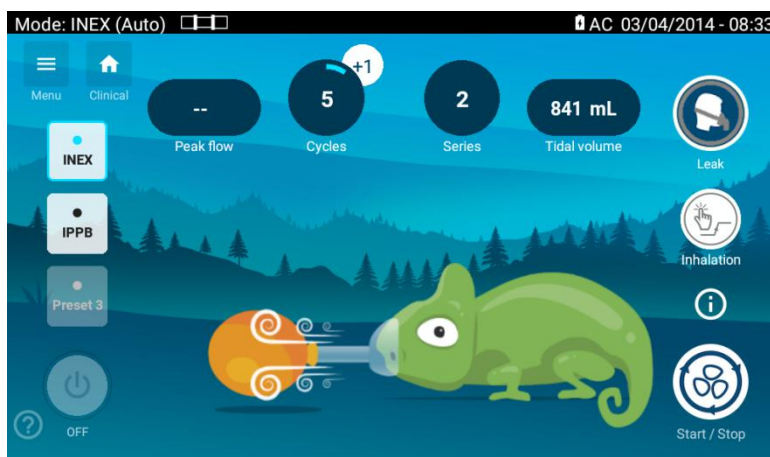


- Tijekom pauze, kameleon i balon se ne pomiču.

Nadzor:


- Vršni protok ažurira se nakon svakog izdaha
- Brojač ciklusa smanjuje se nakon svakog izdaha. Može se povećati tipkom «+1» tijekom posljednjeg ciklusa
- Brojač serija povećava se na svakom početku terapije. Ponovno se postavlja prilikom promjene zadanih postavki ili isključivanja uređaja
- Respiracijski volumen ažurira se nakon svake inspiracije
- Indikator curenja: na kraju udisaja svijetlit će narančasto ako na nastavku za pacijenta ima previše propuštanja i ako ga treba bolje podesiti. To također može značiti da je udisajni tlak prekratak da bi se dosegao postavljeni udisajni tlak. To također može značiti da je vrijeme udisaja prekratko da bi tlak u plućima dosegao postavljeni udisajni tlak.

Na kraju serije (ili pri prekidu terapije pomoću tipke za preskakanje) pojavit će se skočni prozor koji će pitati pacijenta hoće li se nova serija izvesti ili ne.

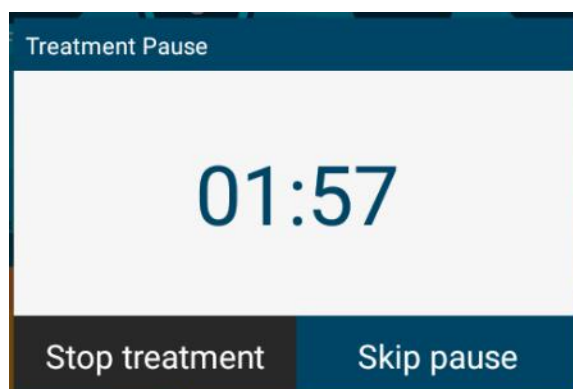

Kronometar je indikativan. Kliknite na «preskoči pauzu» kako biste ponovno pokrenuli seriju ili na «Zaustavi liječenje» kako biste zaustavili terapiju.

Zaslon za obuku načina rada IPPB

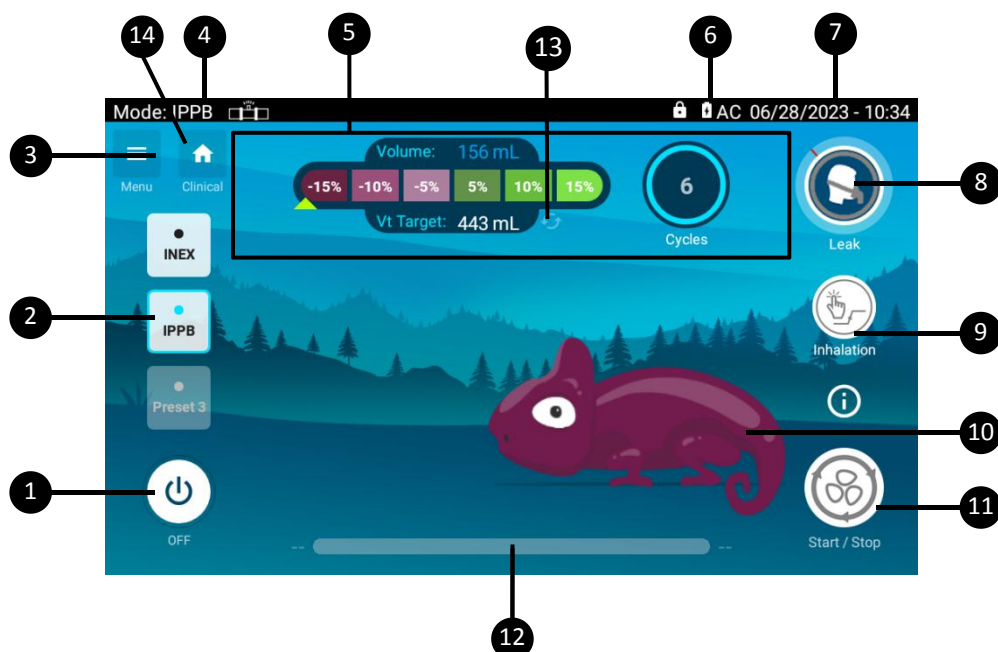

1. Tipka za uključenje/isključenje 2. Izbornik unaprijed postavljenog načina rada (1-3): Unaprijed postavljene postavke postavio je zdravstveni djelatnik i dostupne su pacijentu kada je to potrebno. 3. Tipka izbornika: Omogućuje pristup zaslonu pacijenta i kliničkim izbornicima. 4. Indikator načina terapije: INEX (ručno/automatsko) ili IPPB 5. Praćenje terapije: prikazati vrijednost uživo za prikazano praćenje tijekom terapije. 6. Broj udaha 7. Datum i vrijeme u formatu GGGG/MM/DD (može se promijeniti u izborniku Preferencije)	8. Indikator propuštanja 9. Tipka za ručno pokretanje: dopušta ručno pokretanje udaha tijekom terapije 10. Kameleon: Animacija koja će pratiti terapiju postavljenu kako bi pomogla pacijentu 11. Tipka za pokretanje/zaustavljanje: započinje ili zaustavlja terapiju. 12. Traka vremena terapije: prikaz proteklog i preostalog vremena terapije tijekom terapije kada vrijeme terapije odredi zdravstveni djelatnik 13. Ponovno postavljanje prethodno definiranog ciljnog volumena 14. Prečac kliničkog zaslona
--	---

Provođenje IPPB terapije s funkcijom Obuke

Podesite IPPB terapiju i započnite terapiju. Nakon postavljanja terapije, pacijent može potaknuti udah ili pomoću namjenske tipke.

Volumen prikazuje promjenu volumena u stvarnom vremena tijekom udaha. Ovo praćenje ostaje na konačnom volumenu udaha do sljedećeg udaha. Brojač daha povećava se na početku svake inspiracije. Na kraju svakog

udaha procjenjuje se propuštanje nastavka za pacijenta i indikator propuštanja  postaje narančast ako postoji previše propuštanja na nastavku za pacijenta te ako ga treba bolje prilagoditi.

Tijekom udaha, kameleon će se napuhati prema udjelu postignutog početnog volumena. Postupno će postati zelen kada dosegne i premaši početni volumen.

Ako je postavljeni početni volumen ISKLJUČEN, za 3 prva udisanja:

- Kameleon se ne pomiče
- Početni volumen ostaje nedefiniran

Od prvog udisanja ako je postavka početnog volumena UKLJUČENA ili nakon 3 udisanja ako je postavka početnog volumena ISKLJUČENA:

- Početni volumen je definiran. To je srednja vrijednost volumena 3 prva udaha. Ostaje nepromijenjen do kraja terapije.

Tijekom izdaha, kameleon će se postupno ispuhati dok ne dosegne početni položaj i boju. Ostaje takav do sljedećeg nadahnuća. Strelica prikaza volumena u traci pomaknut će se prema postignutom udjelu početnog volumena. Zadržat će se na maksimalnoj razini do sljedećeg udaha.

