




EO-70

Otthoni mód

Használati utasítás

INEX terápia otthoni módban

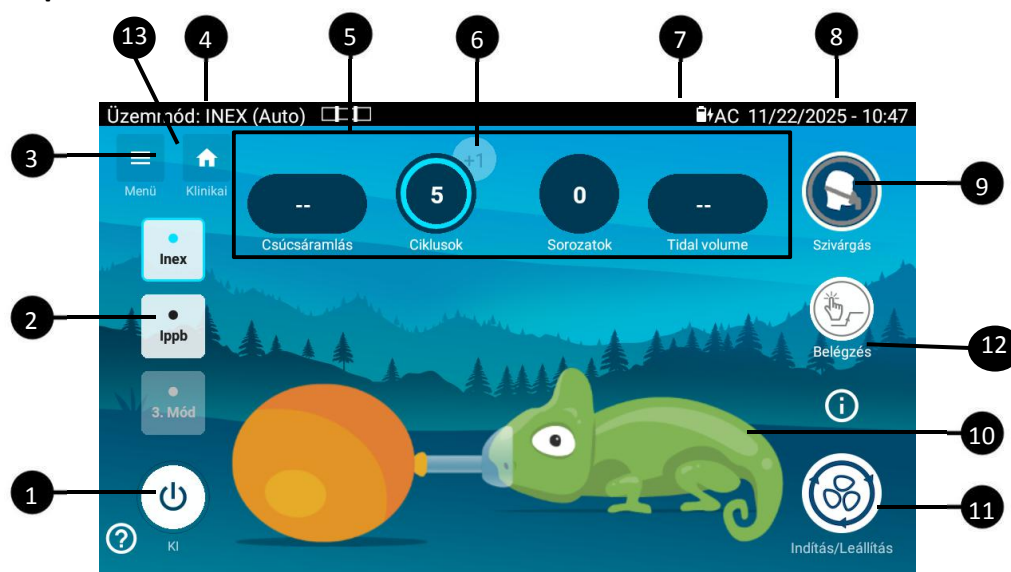


- | | |
|--|--|
| 1. Készülék leállítása | 7. Belső akkumulátor töltöttségi állapota: jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét, vagy azt, hogy az akkumulátor tölt-e. |
| 2. Programozott terápiák (1-3): A kezelőorvos által előre beállított terápia egy gombnyomással elérhető a páciens számára. | 8. Dátum: YYYY/MM/DD formátumban jelzi ki a dátumot. Idő:24órás formátumban jelzi ki az időt. Módosítani a gépi beállítások menüpontban lehet. |
| 3. Menü gomb | 9. Szivárgásjelző |
| 4. Terápiás módok: INEX (manuális/auto) vagy az IPPB. | 10. Kaméleon: az animáció követi a páciens számára beállított terápiát |
| 5. A terápia monitorozása: megjeleníti a kezelés alatti aktuális értékeket. | 11. Kezelés indítása/leállítása |
| 6. Ciklus hozzáadása: lehetővé teszi egy ciklus hozzáadását a folyamatban lévő terápiához, ha szükséges. | 12. Belégzés manuális triggerre kezelés közben |
| | 13. Klinikai megjelenítés gyors elérése |


Az INEX terápia

Válassza ki az előre beállított módok közül az INEX Auto terápiát, és indítsa el a kezelést. A terápia fázisait a kaméleon és a léggömb animáció illusztrálja:

- A belégzés ideje alatt a kaméleon felfújódik és a léggömb leereszt

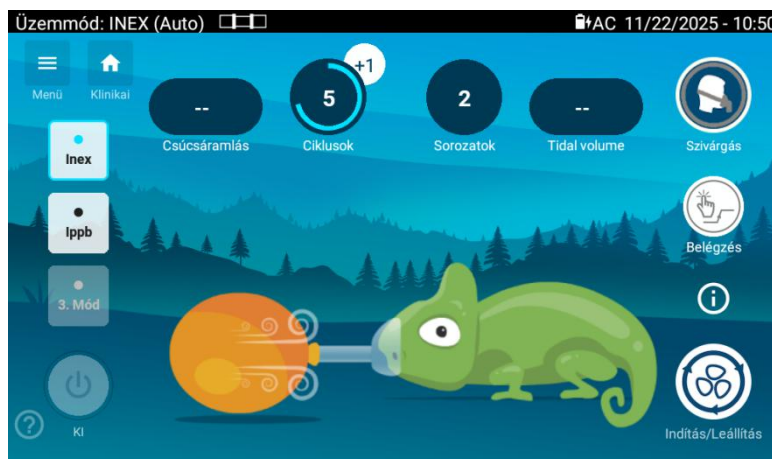

- A kilégzés ideje alatt a kaméleon leereszt és a léggömb felfújódik

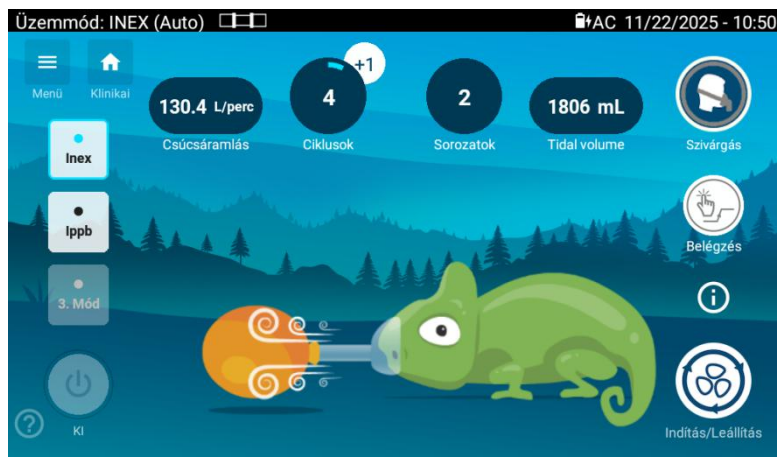


- A szünet ideje alatt a kaméleon és a léggömb is mozdulatlan

A kezelés alatt a kijelzőn a következő paraméterek láthatóak:


- A csúcsáramlás, amely értéke minden kilégzés után frissül
- A ciklusszámláló, amely minden kilégzés után csökken. Az utolsó ciklusban a «+1» gombbal hozzáadható még egy ciklus
- A sorozatszámoló, amely minden terápiekezdésnél növekszik. A sorozatszámoló alaphelyzetbe áll, ha megváltoztatja a kezelést vagy leállítja a készüléket.
- A légzési térfogat, amely értéke minden belégzés után frissül
- Szívárgásjelző: a belégzés végén narancssárgára vált, ha túl sok a szívárgás a páciens oldalon, és korrekciót igényel. Ez azt is jelentheti, hogy a belégzési nyomás túl alacsony vagy, hogy a belégzési idő túl rövid ahhoz, hogy a tüdőnyomás elérje a beállított belégzési értéket.

A terápia végén (vagy ha szünetelteti a terápiát a kihagyás gombbal) megjelenik egy felugró ablak, amely megkérdezi a páciens, hogy kíván-e új sorozatot kezdeni

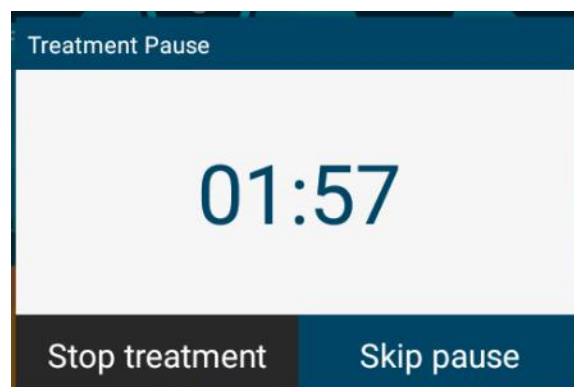

Az időzítő tájékoztató jellegű. Kattintson a «Kezelés indítása» gombra, hogy új sorozatot kezdjen, vagy a «Terápia leállítása» gombra.

Az IPPB terápia otthoni módban

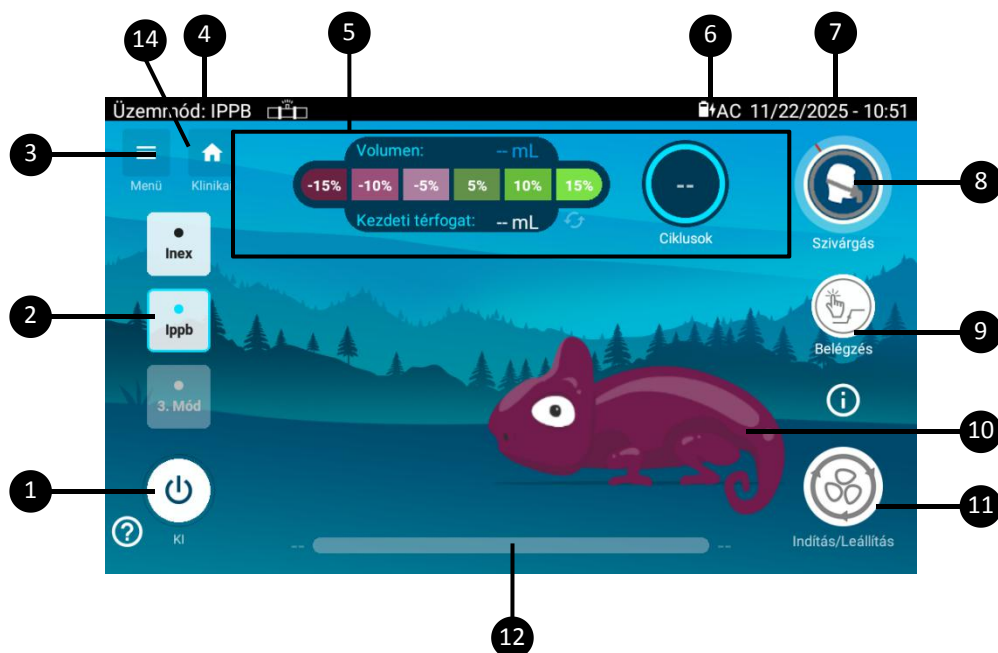

1. Készülék beállítása	7. Dátum és idő YYYY/MM/DD formátumban jelzi ki a dátumot. (a gépi beállítások menü pontban módosítható)
2. Programozott terápiák (1-3): A kezelőorvos által előre beállított kezelés egy gombnyomással elérhető a páciensnek	8. Szívárgásjelző
3. Menü gomb	9. Belégzés: manuálisan indítható belégzés
4. Terápiás módok: INEX (manual/auto) vagy IPPB	10. Kaméleon: az animáció követi a páciens számára beállított terápiát
5. Terápia monitorizálása: megjeleníti a kezelés alatti aktuális értékeket.	11. Kezelés indítása/leállítása
6. A belső akkumulátor töltöttségi állapota: jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét, vagy azt, hogy az akkumulátor tölt-e.	12. Kezelési idő: megjeleníti az eltelt és a hátralévő kezelési időt a terápia közben, ha az kezelési idő orvos által meg van adva.
	13. A célvolumen korábban megadott értékének visszaállítása
	14. Klinikai mód képernyőjének megjelenítése

Az IPPB kezelés otthoni módban

Válassza ki az előre beállított IPPB terápiát és kezdje el a kezelést. A terápia kiválasztása után a belégzés indítható a páciens által vagy a <<Belégzés>> gomb megnyomásával.

Belégzési volumen aktuális mennyiségét láthatja számszerűen is megjelenítve. Minden belégzéskor a kijelzett volumen értéke az aktuális belégzés mennyiségét jelzi ki. A légzésszámláló minden belégzés megkezdésénél növekszik. Minden egyes belégzés végén kiértékeli a páciens felületének szívárgását

és a szívárgásjelző  zöld vagy narancs színűvé válik, jelezve, hogy ha túl sok a szívárgás a páciens oldalon, és korrekciót igényel.

Belégzés során a kaméleon a célérték térfogatával arányosan fúvódik fel. Fokozatosan zöldre vált, amikor eléri a kívánt térfogatot.

Ha a kezdeti térfogat kivan kapcsolva, az első 3 belégzés esetén:

- A kaméleon nem mozdul
- A Kezdeti térfogat meghatározatlan marad

Ha az első belégzéstől, a kezdeti térfogat bevan kapcsolva ,vagy 3 belégzést követően, a kezdeti térfogat kikapcsolt állapotban van.

- Akkor a Kezdeti térfogat automatikusan meghatározásra kerül. Ez az első három belégzésnek az átlaga. A terápia végéig ez az érték változatlanul marad a kijelzőn.

Kilégzés közben a kaméleon fokozatosan fújja ki a levegőt, míg el nem éri a kezdeti pozícióját és színét. A következő belégzésig így marad. A térfogat oszlopdiagramjának nyíla az elért kezdeti érték térfogatának arányában mozog. A következő belégzésig az elért maximális szinten marad.

