




EO-70

Þjálfunarstilling

Notendahandbók

Skjámynd INEX-þjálfunarstillingar

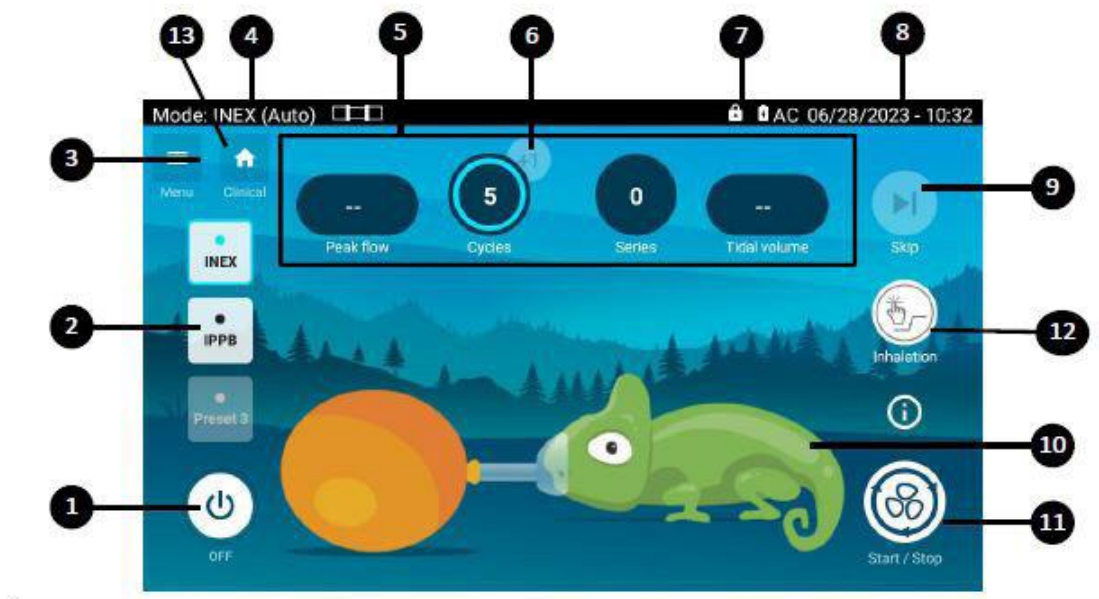


- | | |
|--|--|
| 1. Hnappur til að slökkva. | 7. Merki um rafhlöðuendingu: Gefur til kynna hversu mikil hleðsla er eftir í rafhlöðunni eða hvort rafhlaðan er að hlaða sig. |
| 2. Valmynd fyrir forstillingar (1–3): Forstillingar sem settar eru upp af lækni og aðgengilegar sjúklingi þegar þörf krefur. | 8. Dagsetning: sýnir dagsetninguna á sniðinu ÁÁÁÁ/MM/DD. Tími: Sýnir klukku á 24 klst. sniði. Sniðið má stilla og breyta í valmyndinni Preferences (kjörstillingar). |
| 3. Valmyndarhnappur: Veitir aðgang að sjúklingaskjá og klíniskum valmyndum. | 9. Sleppihnappur: leyfi til að stöðva yfirstandandi INEX-röð. |
| 4. Merki fyrir meðferðarstillingu: INEX (handvirk/sjálfvirk stilling). | 10. Kamelljón: Hreyfimynd sem fylgir uppsettri meðferð til að hjálpa sjúklingnum. |
| 5. Eftirlit með meðferð: sýnir rauntímagildi fyrir viðkomandi eftirlit meðan á meðferð stendur. | 11. Hnappur til að hefja/stöðva: til að hefja/stöðva meðferð. |
| 6. Hnappur til að bæta við lotu: leyfi til að bæta lotu við yfirstandandi meðferð ef þörf krefur. | 12. Framkallar innöndun meðan á meðferð stendur. |
| | 13. Flýtleið á klíniska skjámynd. |


INEX-meðferð veitt í þjálfunarstillingu

Veljið forstillingu með Auto (sjálfvirkri) INEX-meðferð og hefjið meðferðina. Kamelljóns- og blöðruhreyfimyndin fylgir fasa meðferðar:

- Við innöndun stækkar kamelljónið og blaðran minnkar

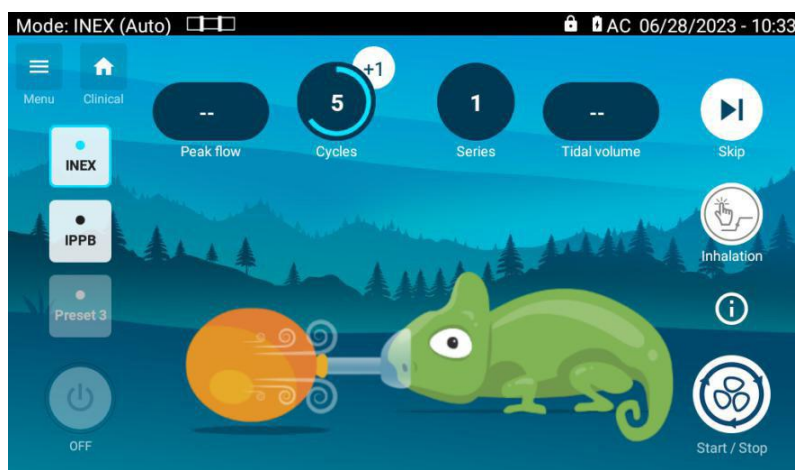

- Við útöndun minnkar kamelljónið og blaðran stækkar

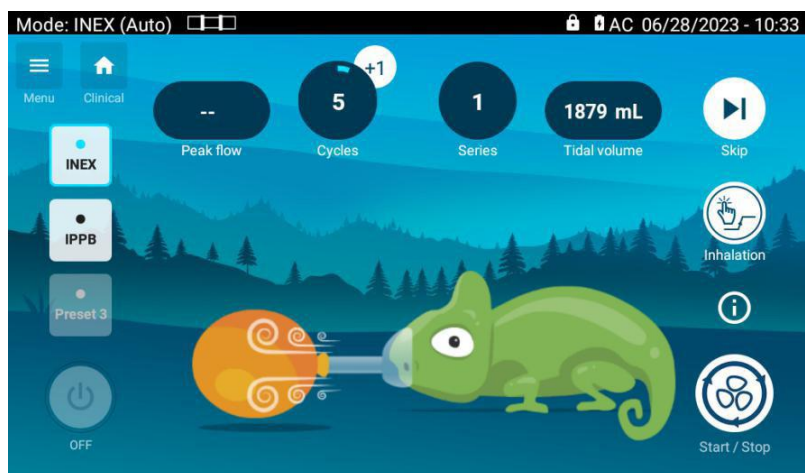


- Meðan hlé er gert hreyfast hvorki kamelljónið né blaðran.

Upplýsingar á skjá:


- Hámarksflæði er uppfært eftir hverja útöndun
- Lotuteljarinn lækkar eftir hverja útöndun. Hækka má töluna með «+1» hnappinum í síðustu lotunni
- Raðarteljari hækkar í hvert sinn sem meðferð hefst. Hann er endurstilltur þegar skipt er um forstillingu eða slökkt á tækjunum
- Andrýmd er uppfærð eftir hverja útöndun

Við lok raðar (eða þegar meðferðin er stöðvuð með því að nota sleppihnappinn) birtist sprettigluggi sem spyr sjúklinginn hvort eigi að framkvæma nýja röð.

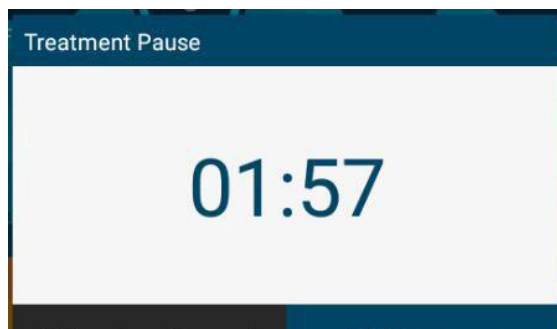

Tímamælirinn sýnir þetta. Smellið á «Skip pause» (sleppa hléi) til að endurræsa röð eða á «Stop treatment» (stöðva meðferð) til að stöðva meðferðina.

IPP meðferð veitt í þjálfunarstillingu

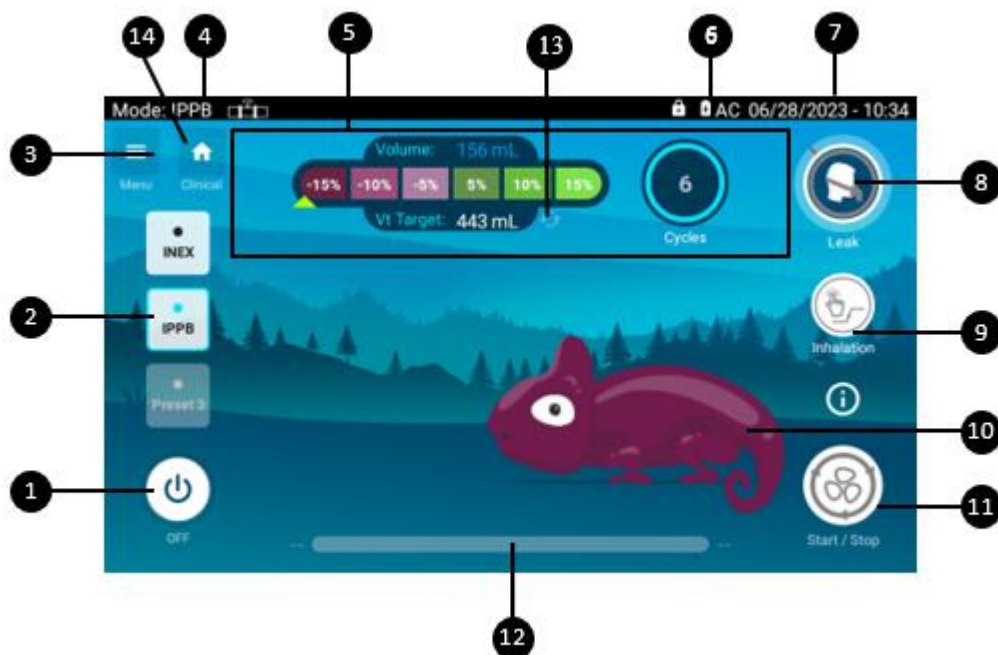

1. Slökkva 2. Valmynd forstillinga. Forstillingar settar upp af læknum og aðgengilegur sjúklingnum þegar þörf er á. 3. Aðalvalmynd: Leyfir aðgang að skjá sjúkling og klínískum valmyndum. 4. Meðferðarstillingar; INEX eða IPPB 5. Meðferðarvöktun: birta gílid fyrir vöktun á meðan á meðferð stendur. 6. Fjöldi andardráttar 7. Dagsetning og tími á sniði ÁÁÁÁ/MM/DD (hægt að breyta í valmyndinni preferences)	8. Merki fyrir lekabúnað 9. Kveikjuhnappur: leyfir að kveikja handvirkst á innblástri á meðan á meðferð stendur. 10. Kamelljón 11. Start/stopp takki: Kveikir á eða stöðvar meðferð. 12. Tímastika fyrir meðferð: sýnir þann meðferðartíma sem er liðinn og þann sem er á 13. Endurstilling á fyrirfram ákveðnum tíðnum. 14.
---	--

Framkvæma IPPB meðferð í þjálfunarstillingu.

Veldu forstillingu með IPPB meðferð og byrjaðu meðferðina. Að lokinni meðferðaruppsetningu getur sjúklingurinn annaðhvort kveikt innblástur eða með því að nota sérstakan hnapp. Tíðni sýnir magn þróunar meðan á innblástri stendur. Þessi vöktun heldur áfram að enda innblástursmagns að næstu innöndun. Öndunarteljarinn er hækkaður í upphafi hvers innblásturs. Í lok hvers innblásturs er lekabúnaður sjúklings metinn og lekavísirinn [1] verður grænn eða appelsínugulur. Í lok hvers innblásturs er lekabúnaður sjúklings metinn og lekavísirinn [1] verður grænn eða appelsínugulur. Appelsínugult mun gefa til kynna að það sé of mikill leki á viðmóti sjúklings og að hann ætti að vera betur stilltur. Meðan á innblástri stendur mun kamelljónið blása upp í samræmi við hlutfallið af rúmmálinu sem náðst hefur. Það mun smám saman breytast í grænt þegar það nær og fer yfir rúmmálið.

Fyrir fyrstu þrjá innblástra

- Hreyfist kameljónið ekki.
- V Markmið helst óskilgreint

Eftir þrjá innblástra

- V Markmið er skilgreint. Það er meðaltal rúmmáls þriggja fyrstu innblástranna. Það helst óbreytt þar til meðferð lýkur.

Við útöndun mun kameljónið tæmast smám saman þar til það nær upphafsstöðu og lit. Þetta helst svona að næsta innblástri. Örin fyrir hljóðstyrkssúlur mun færast eftir því hlutfalli sem náðst hefur af rúmmálinu. Það mun haldast á hámarksstigi sem náðst hefur að næsta innblástri.

