



EO-70

Funzione Coaching



Guida per l'utente

Attivazione della funzione coaching


L'utente può spostarsi sulla schermata coaching per eseguire un trattamento salvato in precedenza in un'impostazione predefinita dal personale medico.

NOTA	La funzione coaching è disponibile solo per le impostazioni predefinite contenenti trattamenti in modalità INEX Auto o in modalità IPPB.
-------------	--

Dalla schermata Clinica, fare clic su  per visualizzare la schermata “Funzione di Coaching”.

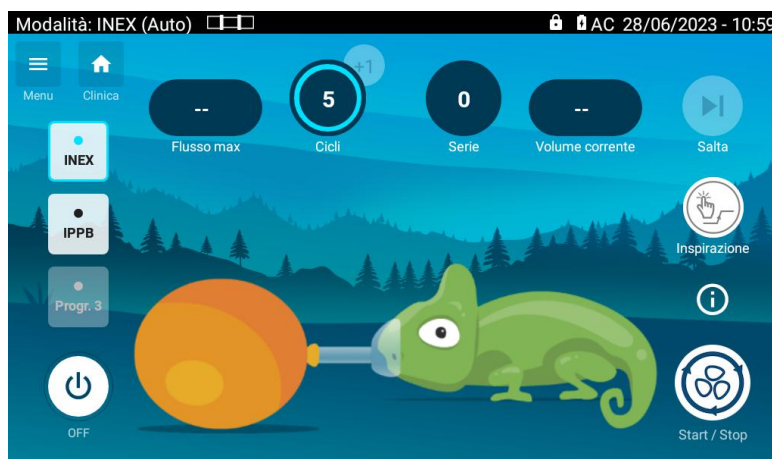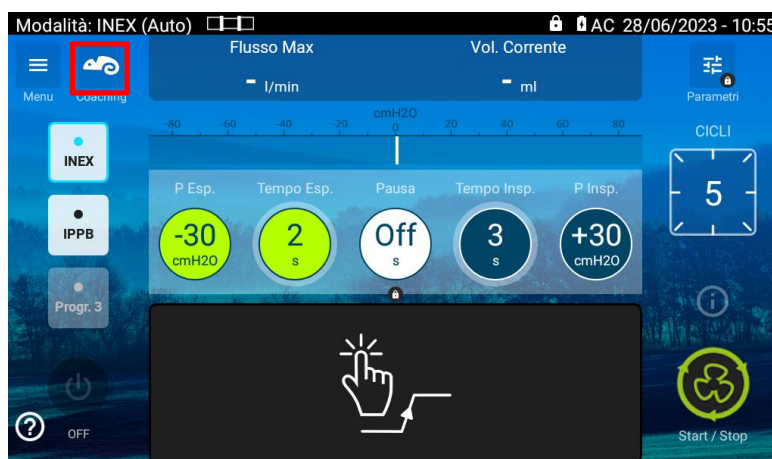


NOTA	La funzione Coaching non è utilizzabile con tutte le modalità di trattamento. Un messaggio indicherà se manca qualcosa per attivare la funzione. Se il messaggio visualizzato sullo schermo indica che nessuna delle impostazioni predefinite disponibili è compatibile, contattare il medico.
-------------	---

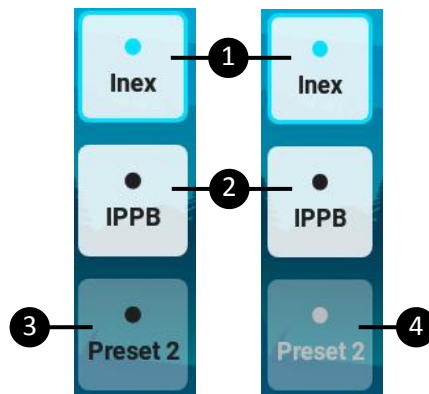Modifica del programma sulla schermata Coaching

1. Impostazione predefinita attivata
2. Impostazione predefinita attivabile
3. Impostazione predefinita inattiva (non disponibile per il coaching)
4. Impostazione predefinita vuota

Per modificare l'impostazione predefinita, fare clic sull'impostazione predefinita desiderata. Se un trattamento è in corso, non è possibile modificare l'impostazione predefinita.

Schermata Coaching in INEX

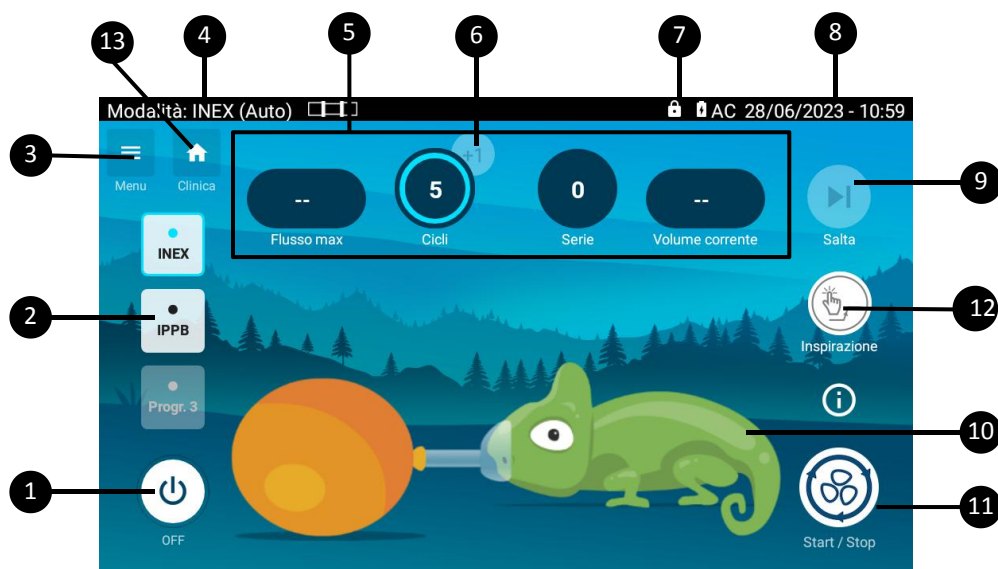


- | | |
|--|---|
| 1. Pulsante di spegnimento. | 7. Spia di autonomia batteria: indica il livello di carica residua della batteria o se la batteria è in carica. |
| 2. Impostazioni predefinite (1-3): impostazioni predefinite accessibili al paziente. | 8. Data e ora: indica la data in formato AAAA/MM/GG e l'ora in formato 24 ore. Possono essere modificate nel menu Preferenze. |
| 3. Pulsante menu: fornisce l'accesso a diversi menu. | 9. Pulsante "Salta": permette di interrompere una serie in corso prima del termine dei cicli. |
| 4. Indicatore di modalità di trattamento: INEX (manuale/auto) o IPPB. | 10. Camaleonte: animazione che segue il trattamento impostato per aiutare il paziente. |
| 5. Monitoraggio della terapia: visualizza i valori monitorati in tempo reale durante la terapia. | 11. Pulsante arresto/avvio: avvia o arresta la terapia. |
| 6. Pulsante di aggiunta ciclo: permette di aggiungere un ciclo alla terapia in corso, se necessario. | 12. Pulsante "Trigger": permette di avviare manualmente l'inspirazione durante il trattamento. |
| | 13. Scorciatoia per lo schermo clinico |


Utilizzo della funzione coaching per eseguire un trattamento in modalità INEX

Selezionare un'impostazione predefinita in INEX Auto e avviare il trattamento. Il camaleonte e il palloncino seguiranno le diverse fasi di trattamento:

- Durante l'inspirazione, il camaleonte si gonfia e il palloncino si sgonfia.

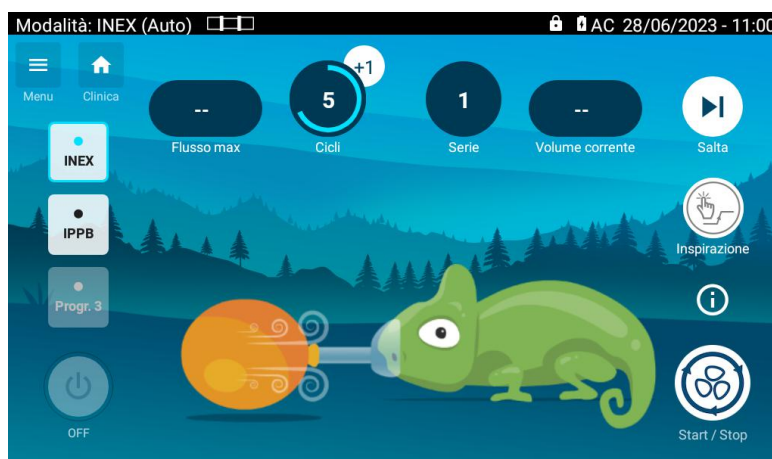

- Durante l'espiazione, il camaleonte si sgonfia e il palloncino si gonfia.

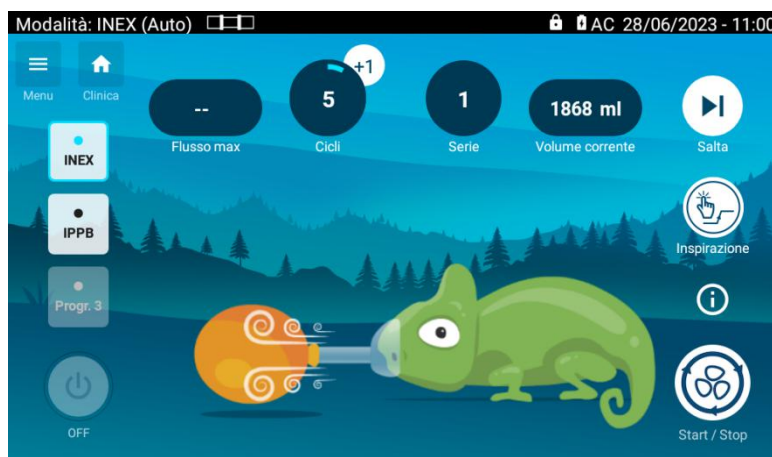

- Durante la pausa, il camaleonte e il palloncino non si muovono.

I dati monitorati sono:


- Il picco di flusso espiratorio, aggiornato dopo ogni espiazione.
- Il contatore di cicli, che diminuisce dopo ogni espiazione. Può essere aumentato con il pulsante "+1" durante l'ultimo ciclo.
- Il contatore delle serie aumenta dopo ogni avvio della terapia. Viene azzerato alla modifica dell'impostazione predefinita e all'arresto dell'apparecchio.
- Il volume viene aggiornato dopo ogni inspirazione.

Al termine della terapia (o all'arresto della terapia mediante il pulsante "Start/Stop"), viene visualizzata una finestra che chiede al paziente se sarà eseguita una nuova serie o no.

Il cronometro è indicativo. Fare clic su "Ignora pausa" per avviare una nuova serie o su "Stop terapia" per interrompere la terapia.



Schermata Coaching in IPPB

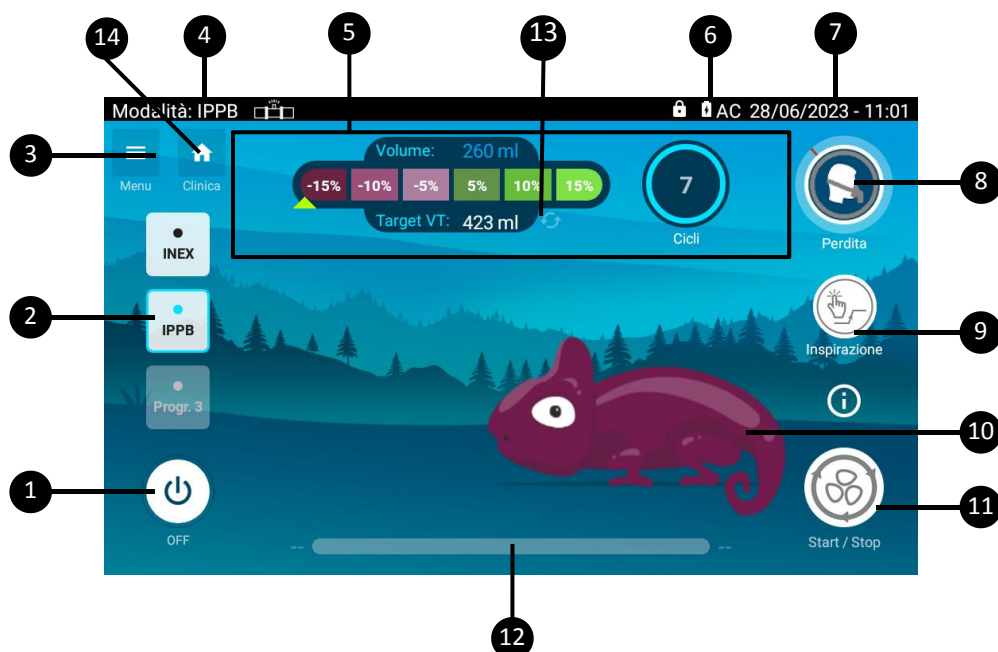

1. Pulsante di spegnimento.	7. Data e ora: indica la data in formato AAAA/MM/GG e l'ora in formato 24 ore. Possono essere modificate nel menu Preferenze.
2. Impostazioni predefinite (1-3): impostazioni predefinite accessibili al paziente.	8. Indicatore di perdita
3. Pulsante menu: fornisce l'accesso a diversi menu	9. Pulsante "Trigger": permette di iniziare manualmente un'inspirazione durante la terapia.
4. Indicatore di modalità di trattamento: INEX (manuale/auto) o IPPB	10. Camaleonte: animazione che segue il trattamento impostato per aiutare il paziente.
5. Monitoraggio della terapia: visualizza i valori monitorati in tempo reale durante la terapia ed i cicli effettuati.	11. Pulsante arresto/avvio: avvia o arresta la terapia.
6. Spia di autonomia batteria: indica il livello di carica residua nella batteria o se la batteria è in carica.	12. Barra di tempo della terapia: visualizza il tempo di terapia trascorso e il tempo restante.
	13. Reset del volume target indicativo precedentemente definito.
	14. Scorciatoia per lo schermo clinico

Utilizzo della funzione coaching per eseguire un trattamento IPPB

Selezionare un'impostazione predefinita in modalità IPPB e avviare il trattamento. In base all'impostazione, l'inspirazione può essere avviata dal paziente o utilizzando il pulsante dedicato.

Il monitoraggio del volume mostra l'evoluzione in tempo reale dello stesso durante l'inspirazione. Questo monitoraggio resta al valore del volume finale fino all'inspirazione successiva. Il contatore di cicli aumenta all'inizio di ogni inspirazione. Al termine di ogni inspirazione, le perdite dell'interfaccia vengono valutate e l'indicatore di perdite  diventa verde o arancione. Un indicatore arancione indica che sono presenti troppe perdite sull'interfaccia paziente e che è necessario regolarla meglio.

Durante l'inspirazione, il camaleonte si gonfia in base alla proporzione di volume target raggiunto. Cambia progressivamente di colore tendendo al verde, quando il volume raggiunge e supera il volume target.

Per le prime 3 inspirazioni:

- Il camaleonte non si gonfia.
- Il monitoraggio del volume target resta indefinito.

Dopo 3 inspirazioni:

- Il volume target è definito. Si tratta del volume medio delle prime 3 inspirazioni. Resta invariato fino al termine del trattamento.

Durante l'espiazione, il camaleonte si sgonfia progressivamente fino a tornare di dimensioni normali e del colore iniziale. Resterà così fino alla prossima inspirazione.

La freccia del grafico di volume si sposta in base alla proporzione di volume raggiunto e resta al livello massimo raggiunto fino all'inspirazione successiva.

