




EO-70

Coaching-funksjon Brukerhåndbok

INEX coaching-skjermen

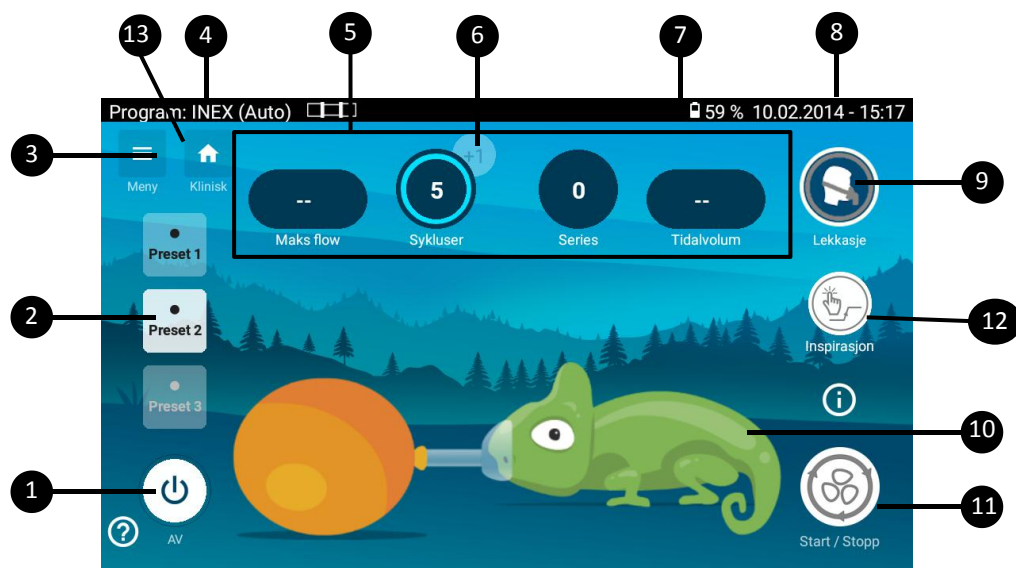


1. Av-knapp 2. Meny for forhåndsinnstilt modus (1–3): Forhåndsinnstillinger installert av klinikeren og tilgjengelig for pasienten ved behov. 3. Meny: Gir tilgang til pasientskjerm og kliniske menyer 4. Indikator for behandlingsprogram: INEX (manuell/auto) eller IPPB 5. Behandlingsmonitorering: viser sanntidsverdier under behandlingen 6. Knapp for tilleggssyklus: tillater å legge til en syklus i den pågående behandlingen om nødvendig	7. Batteriindikator: Indikerer nivået som er igjen i batteriet eller om batteriet lades. 8. Dato: indikerer datoen i ÅÅÅÅ/MM/DD-format. Tid: Indikerer klokkeslettet på 24-timersklokke. Dette kan settes opp og endres fra Innstillinger-menyen (Preferences). 9. Lekkasjeindikator 10. Kameleon: Animasjon som følger konfigurert behandling for å hjelpe pasienten 11. Start/stopp-knapp: starter eller stopper behandlingen. 12. Utløs en inspirasjon under behandlingen 13. Snarvei til klinisk skjerm
--	---


Utføre en INEX-behandling med coaching-funksjon

Konfigurer en INEX Auto-behandling, og start behandlingen.. Animasjonen vil følge behandlingsfasene:

- Under inspirasjon blåses kameleonen opp, ballongen tømmes

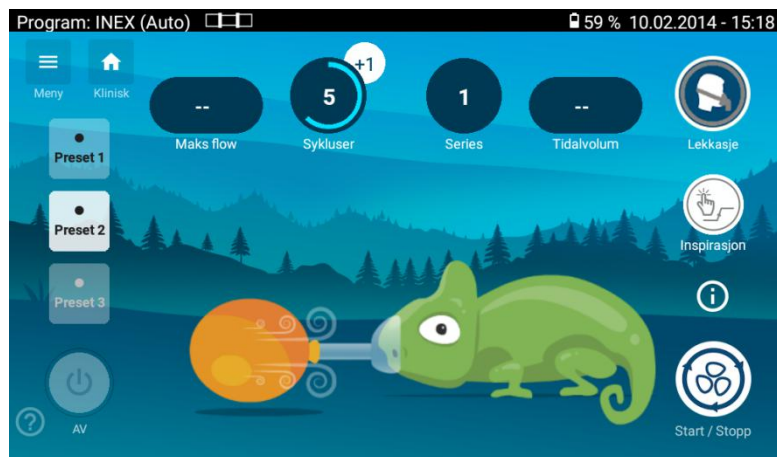

- Under ekspirasjon tømmes kameleonen, ballongen blåses opp

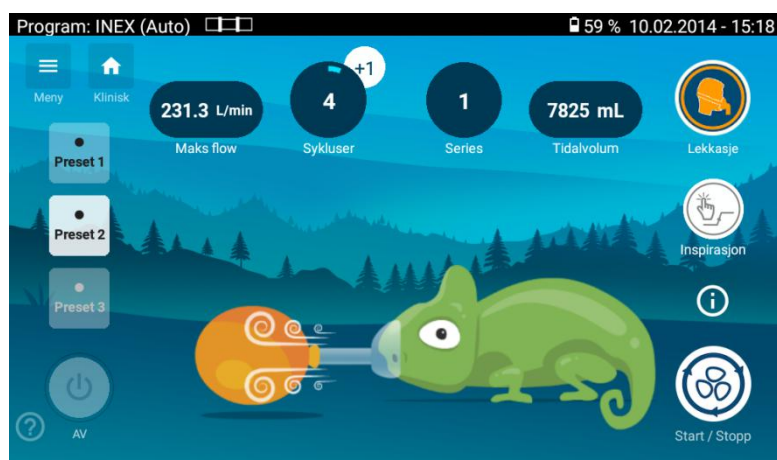


- Under pause beveger verken kameleon eller ballong seg.

Overvåking:


- Maks gjennomstrømning oppdateres etter hver ekspirasjon
- Syklustelleren reduseres etter hver ekspirasjon. Den kan økes med «+1»-knappen under siste syklus
- Serietelleren økes ved hver behandlingsstart. Den tilbakestilles når du endrer forhåndsinnstilling eller slår av enheten
- Tidalvolumet oppdateres etter hver inspirasjon
- Lekkasjeindikator: lyser oransje på slutten av inspirasjonen hvis det er for mye lekkasje i pasientgrensesnittet. Det kan også skyldes at inspirasjonstrykket eller inspirasjonstiden er for kort til å nå innstilt verdi

Når serien er fullført, eller behandlingen stoppes med **hopp over-knappen**, vises en popup-melding som spør pasienten om de ønsker å starte en ny serie.

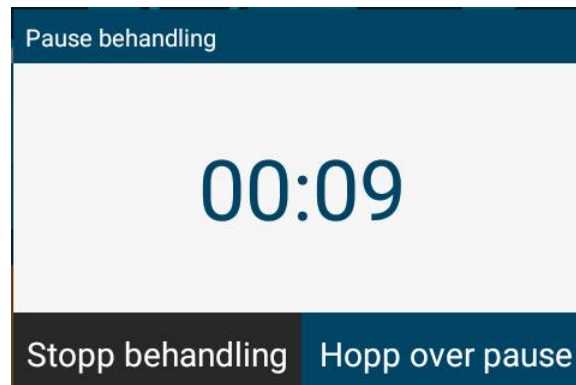

Stoppeklokken er kun veiledende. Klikk på **"Hopp over pause"** for å starte serien på nytt, eller trykk på **"Stopp behandling"** for å avslutte behandlingen.

IPPB coaching-skjermen

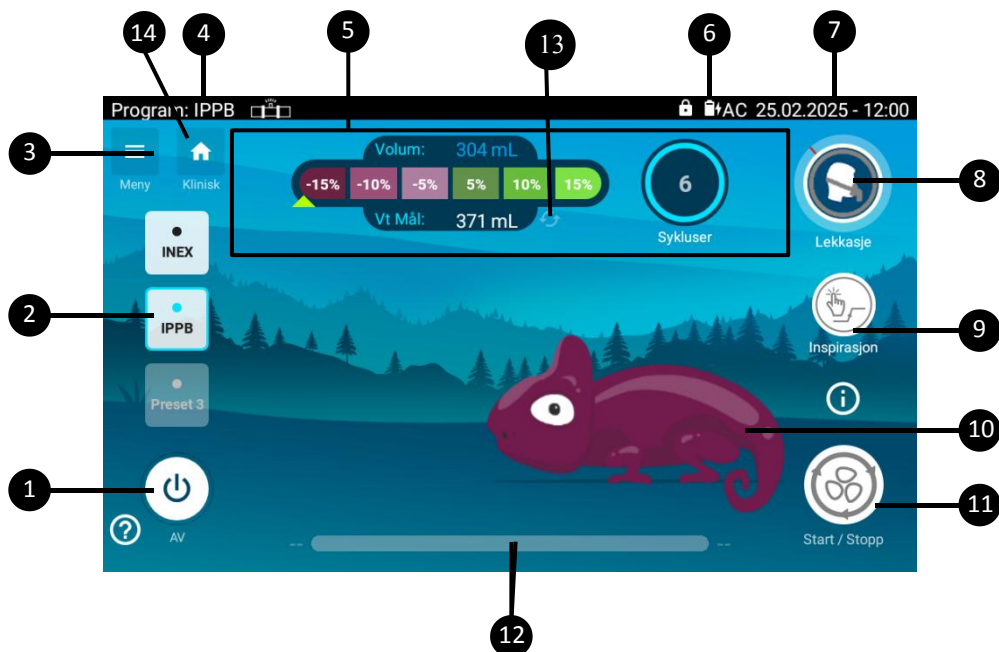

1. Av-knapp	8. Lekkasjeindikator
2. Meny for forhåndsinnstilt modus (1–3): Forhåndsinnstillinger installert av klinikeren og tilgjengelig for pasienten ved behov.	9. Utløserknapp: tillat å utløse en inspirasjon manuelt under en behandling
3. Meny: Gir tilgang til pasientskjerm og kliniske menyer	10. Kameleon: Animasjon som vil følge behandlingen som er konfigurert for å hjelpe pasienten
4. Indikator for behandlingsprogram: INEX (manuell/auto) eller IPPB	11. Start/stopp-knapp: starter eller stopper behandlingen.
5. Behandlingsmonitorering: viser sanntidsverdier under behandlingen	12. Behandlingstidslinje: Viser hvor lang tid som har passert og hvor mye behandlingstid som gjenstår, dersom dette er angitt av klinikeren
6. Batteriindikator???	13. Tilbakestilling av målvolumet
7. Dato og klokkeslett med formatet ÅÅÅÅ/MM/DD (kan endres i innstillingsmenyen)	14. Snarvei til klinisk skjerm

Utføre en IPPB-behandling med coaching-funksjon

Konfigurer en IPPB-behandling og start. Inspirasjon kan utløses av pasienten eller med utløserknappen.

Volumvisningen viser sanntidsutviklingen under inspirasjon og beholdes til neste pust. Respirasjonstelleren økes ved starten av hver inspirasjon. På slutten av hver inspirasjon evalueres lekkasje; indikatoren lyser oransje (oransje betyr for mye lekkasje).

Under inspirasjon blåses kameleonen opp i takt med andelen av målvolumet og blir gradvis grønn når målet nås eller overskrides.

Hvis målvolum er AV under de tre første inspirasjonene:

- Kameleonen beveger seg ikke
- Målvolum forblir udefinert

Fra første inspirasjon når målvolum er PÅ, eller etter tre inspirasjoner når det er AV, blir målvolumet definert. Vt mål beregnes som gjennomsnittet av de tre første inspirasjonene og forblir uendret resten av behandlingen.

Under ekspirasjon tømmes kameleonen gradvis til den når opprinnelig posisjon og farge, og forblir slik til neste inspirasjon. Søylediagrammet for volum beveger seg etter andelen av målvolum nådd, og står på maksnivå til neste inspirasjon

