




EO-70

Funkcji Szkolenia

Instrukcja obsługi

Ekran Szkolenia w trybie INEX

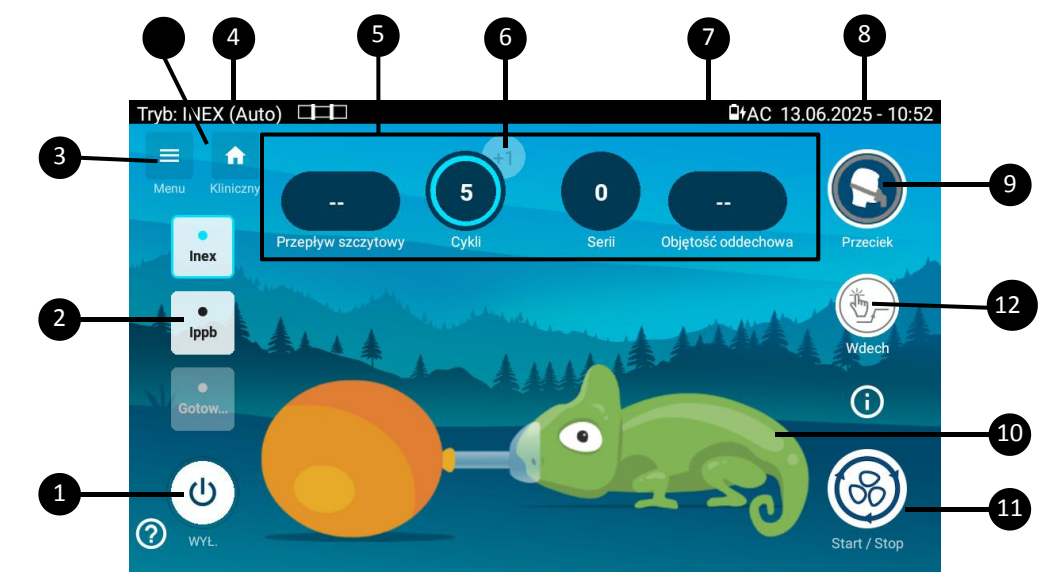


1. Przycisk wyłączenia 2. Gotowe zestawy ustawień (1-3): gotowe zestawy ustawień dostępne dla pacjenta. 3. Przycisk menu: dostęp do różnych menu. 4. Wskaźnik trybu terapii: INEX (ręczny/Auto) lub IPPB 5. Monitorowanie zabiegu: wyświetla monitorowane wartości w czasie rzeczywistym podczas terapii. 6. Przycisk dodania cyklu: pozwala dodać cykl do bieżącej terapii, jeśli zachodzi taka potrzeba.	7. Wskaźnik naładowania baterii: wskazuje pozostały poziom naładowania baterii lub informuje, czy bateria jest w trakcie ładowania. 8. Data i godzina: wskazuje datę w formacie RRRR/MM/DD i godzinę w formacie 24-godzinnym. Można ją ustawiać w menu Preferencji. 9. Wskaźnik przecieku 10. Kameleon: Animacja przedstawiająca skonfigurowaną terapię, aby pomóc pacjentowi. 11. Przycisk uruchomienia/zatrzymania: uruchamia lub zatrzymuje terapię. 12. Przycisk Wyzwalacza: umożliwia ręczne uruchomienie wdechu podczas terapii. 13. Skrót do ekranu klinicznego
---	--


Korzystanie z funkcji Szkolenia w celu przeprowadzenia terapii w trybie INEX

Skonfiguruj terapię INEX Auto i rozpocznij terapię. Kameleon i balon będą przedstawiać różne fazy terapii:

- Podczas wdechu kameleon nadyma się a balon się kurczy.

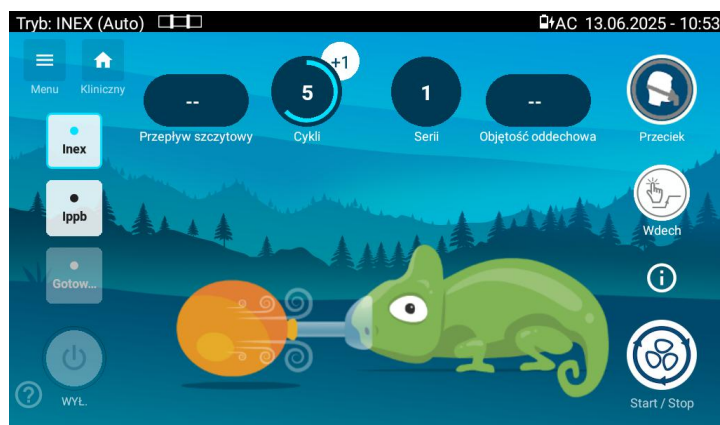

- Podczas wydechu kameleon kurczy się a balon się nadyma.

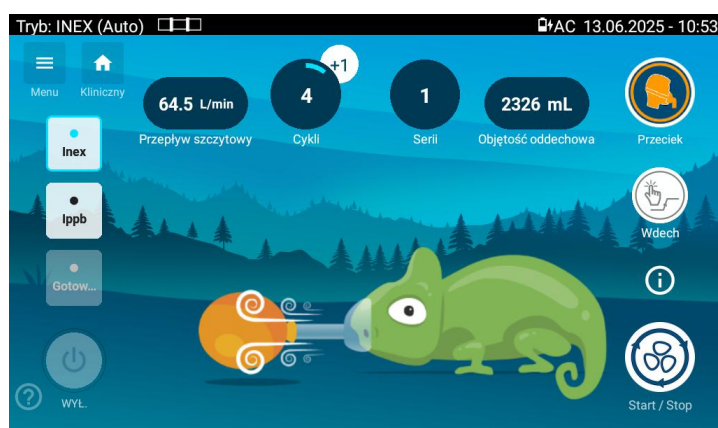


- Podczas przerwy kameleon i balon pozostają nieruchome.

Monitorowanie:


- Przepływ szczytowy jest aktualizowany po każdym wydechu.
- Licznik cykli zmniejsza się po każdym wydechu. Można go stopniowo zwiększać za pomocą przycisku „+1” podczas ostatniego cyklu.
- Licznik serii jest stopniowo zwiększany po każdym rozpoczęciu terapii. Jest zerowany po zmianie gotowego zestawu ustawień i przy zatrzymaniu urządzenia.
- Objętość jest aktualizowana po każdym wdechu.
- Wskaźnik przecieku: zmieni kolor na pomarańczowy pod koniec wdechu, jeśli nieszczelność w interfejsie pacjenta jest zbyt duża i należy ją wyregulować. Może to również oznaczać, że ciśnienie wdechowe jest zbyt krótkie, aby osiągnąć zadaną wartość ciśnienia wdechowego. Może to również oznaczać, że czas wdechu jest zbyt krótki, aby ciśnienie w płucach osiągnęło zadaną wartość ciśnienia wdechowego.

Na koniec zabiegu (lub po zatrzymaniu terapii za pomocą przycisku „Pomiń”) pojawi się okno z pytaniem do pacjenta, czy będzie realizowana nowa seria.

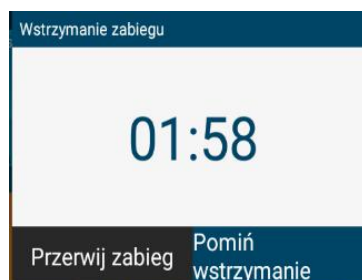

Minutnik ma charakter poglądowy. Kliknij przycisk „Pomiń przerwę”, aby ponownie rozpocząć serię, lub „Koniec terapii”, by ją zatrzymać.

Ekran Szkolenia w trybie IPPB

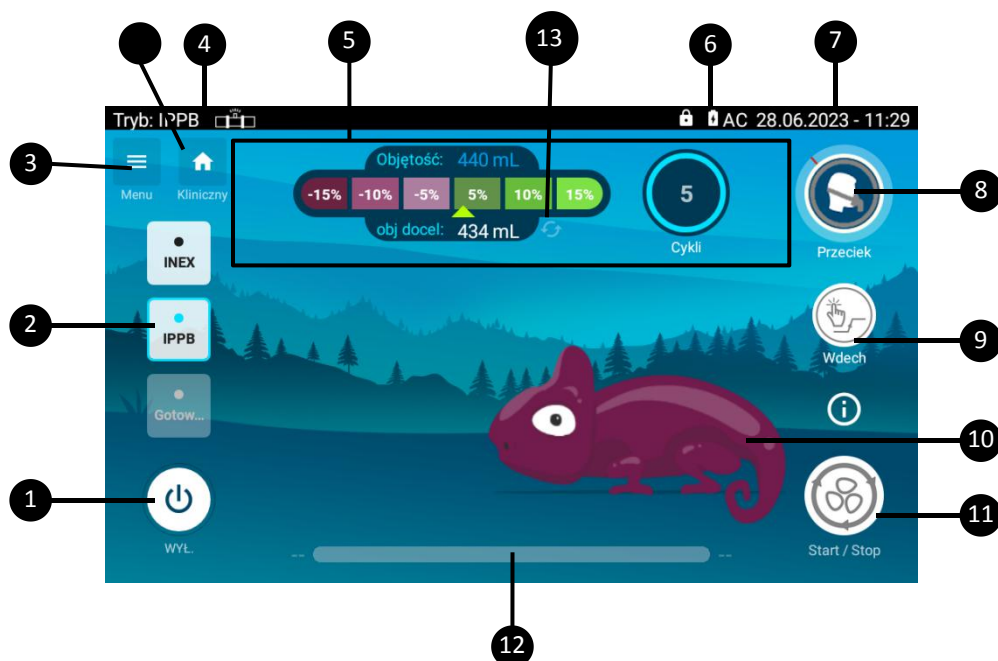

1. Przycisk wyłączenia 2. Gotowe zestawy ustawień (1-3): gotowe zestawy ustawień dostępne dla pacjenta. 3. Przycisk menu: dostęp do różnych menu. 4. Wskaźnik trybu terapii: INEX (ręczny/Auto) lub IPPB 5. Monitorowanie terapii: wyświetla monitorowane wartości w czasie rzeczywistym podczas terapii. 6. Wskaźnik naładowania baterii: wskazuje pozostały poziom naładowania baterii lub informuje, czy bateria jest w trakcie ładowania.	7. Data i godzina: wskazuje datę w formacie RRRR/MM/DD i godzinę w formacie 24-godzinnym. Można ją ustawiać w menu Preferencji. 8. Wskaźnik przecieku. 9. Przycisk Wyzwalacza: umożliwia ręczne uruchomienie wdechu podczas terapii. 10. Kameleon: Animacja przedstawiająca skonfigurowaną terapię, aby pomóc pacjentowi. 11. Przycisk uruchomienia/ zatrzymania: uruchamia lub zatrzymuje terapię. 12. Pasek pomiaru czasu zabiegu: wyświetla czas od rozpoczęcia terapii i czas do zakończenia terapii. 13. Resetowanie wcześniej ustawionej objętości docelowej. 14. Skrót do ekranu klinicznego.
--	---

Korzystanie z funkcji Szkolenia w celu przeprowadzenia terapii IPPB

Skonfiguruj terapię IPPB i rozpocznij terapię. W zależności od konfiguracji wdech może być inicjowany albo przez pacjenta, albo za pomocą odpowiedniego przycisku.

Monitorowanie Objętości pokazuje w czasie rzeczywistym zmianę objętości podczas wdechu. Ten wskaźnik wyświetla wartość objętości końcowej do czasu następnego wdechu. Licznik cykli jest stopniowo zwiększany na początku każdego wdechu.

Pod koniec każdego wdechu przeprowadzana jest ocena nieszczelności interfejsu pacjenta a

wskaźnik przecieku  staje się pomarańczowy jeśli istnieje zbyt duża nieszczelność w interfejsie pacjenta i należy ją lepiej wyregulować.

Podczas wdechu kameleon będzie się nadmuchiwał balon zgodnie z proporcjami osiągniętej objętości początkowej. Stopniowo będzie zmieniać kolor na zielony po osiągnięciu i przekroczeniu objętości początkowej.

Jeśli ustawienie objętości początkowej jest wyłączone, dla 3 pierwszych wdechów:

- Kameleon nie porusza się
- Objętość początkowa pozostaje niezdefiniowana

Od pierwszego wdechu, jeśli ustawienie objętości początkowej jest włączone lub po 3 wdechach Jeśli ustawienie objętości początkowej jest wyłączone:

- Objętość początkowa jest określona. To średnia objętość 3 pierwszych wdechów. Wartość ta pozostaje niezmienną do końca terapii.

Podczas wydechu kameleon będzie stopniowo kurczyć się, aż wróci do początkowej wielkości i koloru. Zachowa ten wygląd do następnego wdechu.

Strzałka wykresu objętości będzie się przesuwać zgodnie z proporcją osiągniętej objętości początkowej. Utrzyma się na osiągniętym poziomie maksymalnym aż do następnego wdechu.

