




EOVE-70

Funcția de coaching

Ghidul utilizatorului

Ecranul Coaching în modul INEX

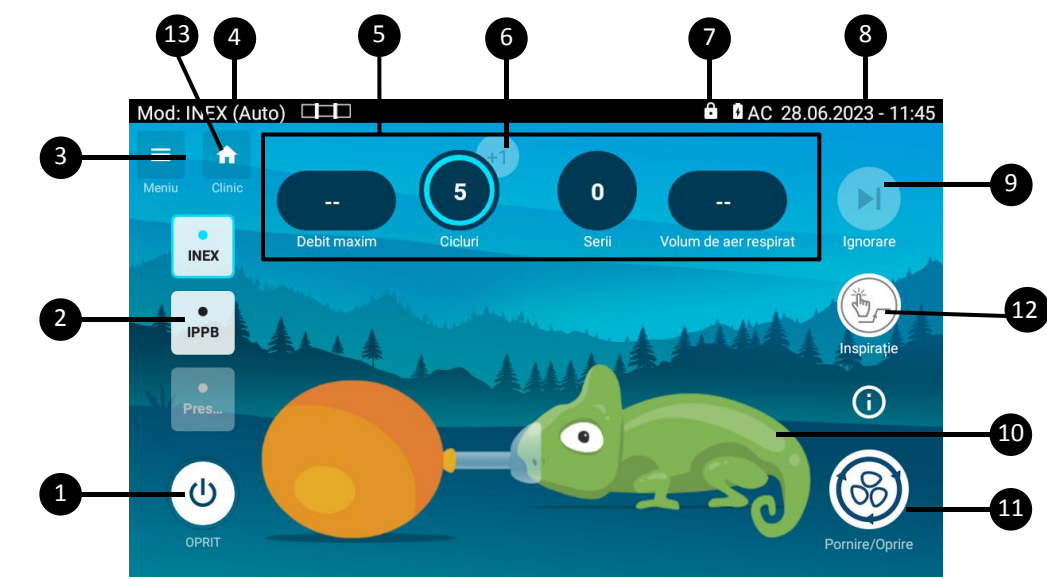


1. Buton de oprire 2. Meniul modului de presetări (1-3): presetările configurate de clinician și accesibile pacientului atunci când este necesar. 3. Butonul meniului: permite accesul la ecranul pacientului și la meniurile clinice 4. Indicatorul modului de tratament: Modul INEX (manual/Auto) sau IPPB 5. Monitorizarea tratamentului: afișează valorile monitorizate în timp real în timpul tratamentului. 6. Butonul de adăugare a unui ciclu: permite adăugarea unui ciclu la tratamentul în curs, dacă este necesar	7. Indicatorii autonomiei bateriei: indică nivelul de încărcare rămas în baterie sau dacă bateria se încarcă. 8. Data: indică data în formatul AAAA/LL/ZZ. Ora: indică ora în formatul 24 h. Aceasta poate fi configurată și modificată din meniul Preferințe. 9. Butonul de ignorare: permite oprirea seriei INEX în curs. 10. Cameleon: animație care urmează tratamentul configurat pentru a ajuta pacientul 11. Butonul Pornire/Oprire: începe sau oprește tratamentul. 12. Butonul Trigger: permite declanșarea manuală a unei inspirații în timpul unui tratament. 13. Comandă rapidă pentru ecranul clinic
--	---

Efectuarea tratamentului INEX fără funcția de coaching


Selectați o presetare cu modul de tratament INEX auto și începeți tratamentul.

Cameleonul și aplicația balon vor urma fazele de tratament:

În timpul inspirului, cameleonul se umflă și balonul se dezumflă

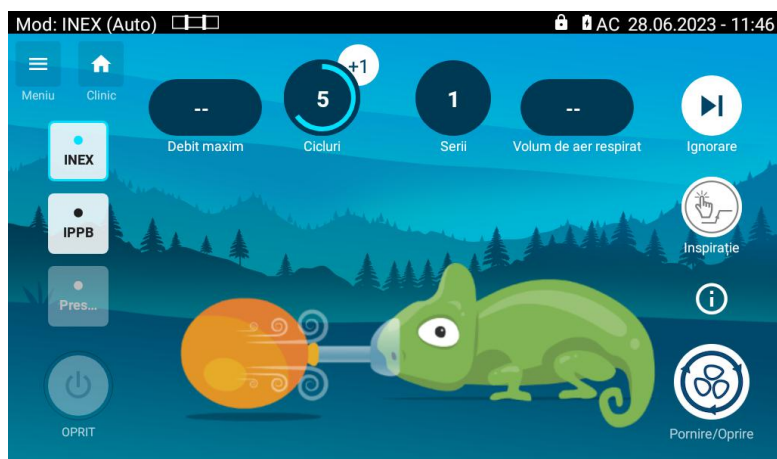

În timpul expirației, cameleonul se dezumflă și balonul se umflă

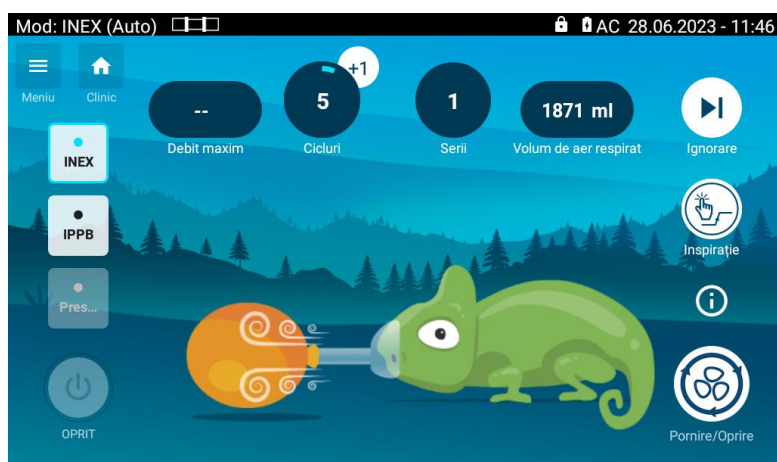

În timpul pauzei, cameleonul și balonul nu se mișcă.

Monitorizările:


- Debitul maxim este actualizat după fiecare expir
- Contorul descrescător de cicluri scade după fiecare expir. Acesta poate fi crescut cu butonul „+1” în timpul ultimului ciclu
- Contorul de serie este incrementat la fiecare început de tratament. Acesta este resetat când se modifică presetarea sau se închid dispozitivele
- Volumul de aer respirat este actualizat după fiecare inspir

La sfârșitul fiecărei serii (sau când se oprește tratamentul folosind butonul de ignorare), se afișează o fereastră pop-up în care pacientul este întrebat dacă să se efectueze o nouă serie sau nu.



Cronometrul este elocvent. Faceți clic pe „Ignorare pauză” pentru a reporni o serie sau pe „Oprire tratament” pentru a opri tratamentul.

Ecranul Coaching în modul IPPB

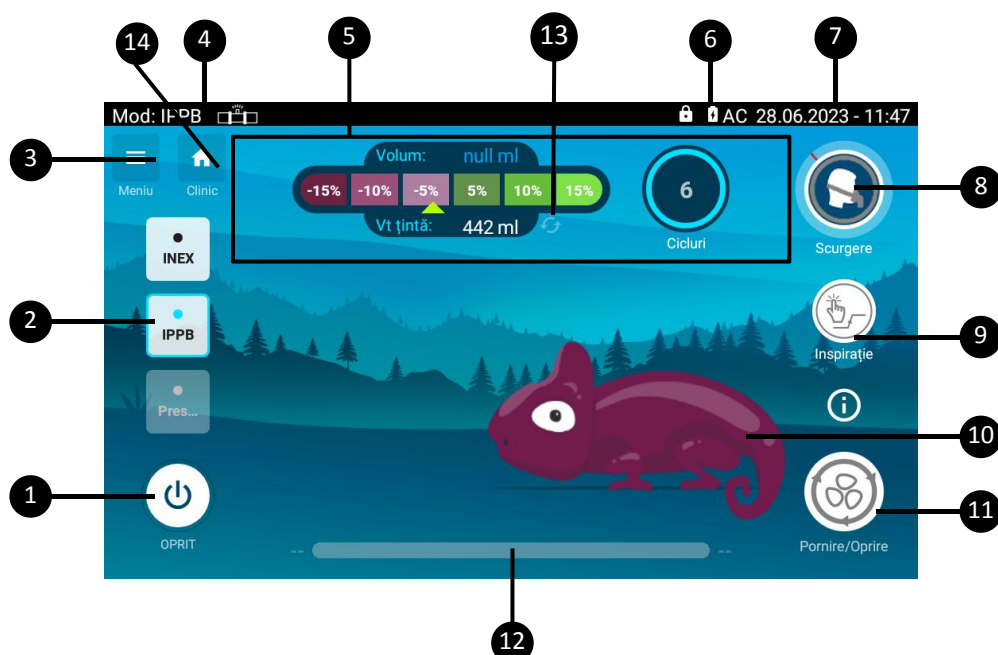

1. Buton de oprire 2. Meniul modului de preșetări (1-3): preșetările configurate de clinician și accesibile pacientului atunci când este necesar. 3. Butonul meniului: permite accesul la ecranul pacientului și la meniurile clinice 4. Indicatorul modului de tratament: Modul INEX (manual/Auto) sau IPPB 5. Monitorizarea tratamentului: afișează valorile monitorizate în timp real în timpul tratamentului. 6. Numărul de respirații. 7. Data: indică data în formatul AAAA/LL/ZZ. Ora: indică ora în formatul 24 h. Aceasta poate fi configurată și modificată din meniul Preferințe	8. Indicator de scurgere 9. Butonul de declanșare: permite declanșarea manuală a inspirației în timpul unui tratament 10. Cameleon: animație care urmează tratamentul configurat pentru a ajuta pacientul 11. Butonul Pornire/Oprire: începe sau oprește tratamentul. 12. Bara de durată a tratamentului: afișează timpul scurs și timpul rămas pe durata tratamentului, atunci când durata tratamentului este stabilită de clinician 13. Reinițializarea volumului țintă definit anterior 14. Comandă rapidă pentru ecranul clinic
---	---

Efectuarea tratamentului IPPB fără funcția de coaching

Selectați o presetare cu tratamentul IPPB și începeți tratamentul.

După configurarea tratamentului, inspirul poate fi declanșat fie de pacient, fie folosind butonul dedicat.

Monitorizarea volumului arată evoluția în direct a volumului în timpul inspirului. Această monitorizare rămâne la valoarea volumului final până la următorul inspir.

Contorul de ciclu de respirație este incrementat la începutul fiecărui inspir

La sfârșitul fiecărui inspir, scurgerile interfeței sunt evaluate și indicatorul de scurgere  devine verde sau portocaliu. Indicatorul portocaliu arată că scurgerea este prea mare la interfața cu pacientul și că ar trebui să fie reglată mai bine.

În timpul inspirului, cameleonul se umflă urmărind proporția volumului-țintă atinsă. Acesta va deveni treptat verde când ajunge la volumul-țintă și îl depășește.

Pentru primele 3 inspiruri:

- Cameleonul nu se mișcă
- Volumul țintă rămâne nedefinit

După 3 inspiruri:

- Volumul țintă este definit. Acesta este volumul mediu al primelor 3 inspiruri. Acesta rămâne neschimbat până la sfârșitul tratamentului.

În timpul expirului, cameleonul se va dezumfla treptat, ajungând în poziția și la culoarea inițială. Acesta rămâne așa până la următorul inspir.

Săgeata graficului care indică volumul se va mișca urmărind proporția volumului-țintă atinsă. Ea va rămâne la nivelul maxim atins până la următorul inspir.

