




# EOVE-70

funcției de coaching

Ghidul utilizatorului

## Ecranul Coaching în modul INEX

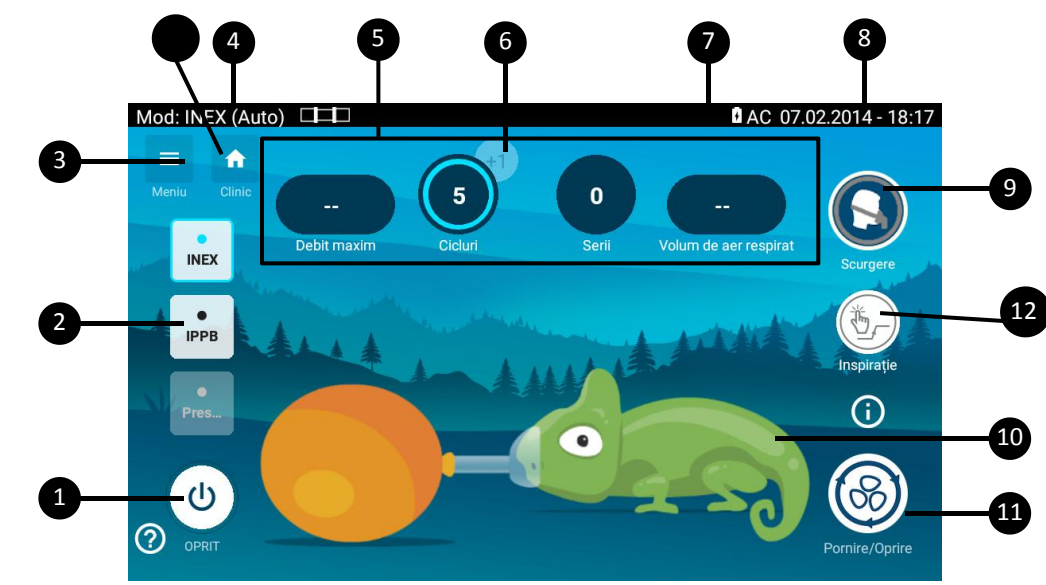


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buton de oprire</li> <li>2. Meniul modului de presetări (1-3): presetările configurate de clinician și accesibile pacientului atunci când este necesar.</li> <li>3. Butonul meniului: permite accesul la ecranul pacientului și la meniurile clinice</li> <li>4. Indicatorul modului de terapie: Modul INEX (manual/Auto) sau IPPB</li> <li>5. Monitorizarea terapiei: afișează valorile monitorizate în timp real în timpul terapiei.</li> <li>6. Butonul de adăugare a unui ciclu: permite adăugarea unui ciclu la terapia în curs, dacă este necesar</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Indicatorii autonomiei bateriei: indică nivelul de încărcare rămas în baterie sau dacă bateria se încarcă.</li> <li>8. Data: indică data în formatul AAAA/LL/ZZ. Ora: indică ora în formatul 24 h. Aceasta poate fi configurată și modificată din meniul Preferințe.</li> <li>9. Indicator de scurgere</li> <li>10. Cameleon: animație care urmează după terapie configurat pentru a ajuta pacientul</li> <li>11. Butonul Pornire/Oprire: începe sau oprește terapia.</li> <li>12. Butonul Trigger: permite declanșarea manuală a unei inspirații în timpul unui tratament.</li> <li>13. Comandă rapidă pentru ecranul clinic</li> </ol> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## Utilizarea funcției de coaching pentru a efectua o terapie în modul INEX

Configurare o terapie INEX Auto și începeți terapia. Cameleonul și balonul vor urma diferitele faze ale terapiei:

În timpul inspirului, cameleonul se umflă și balonul se dezumflă

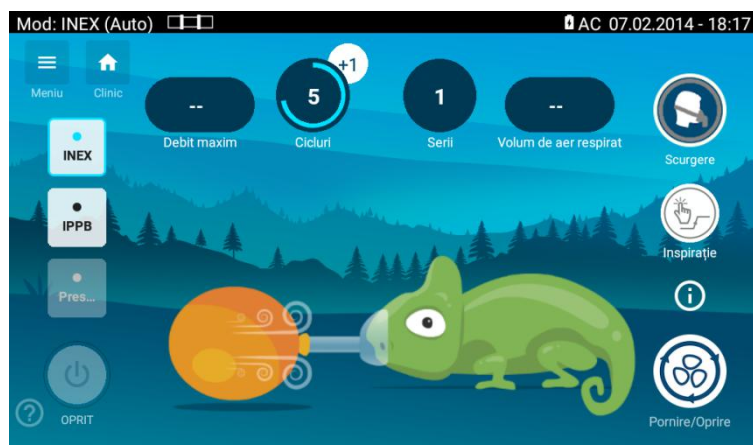

În timpul expirației, cameleonul se dezumflă și balonul se umflă

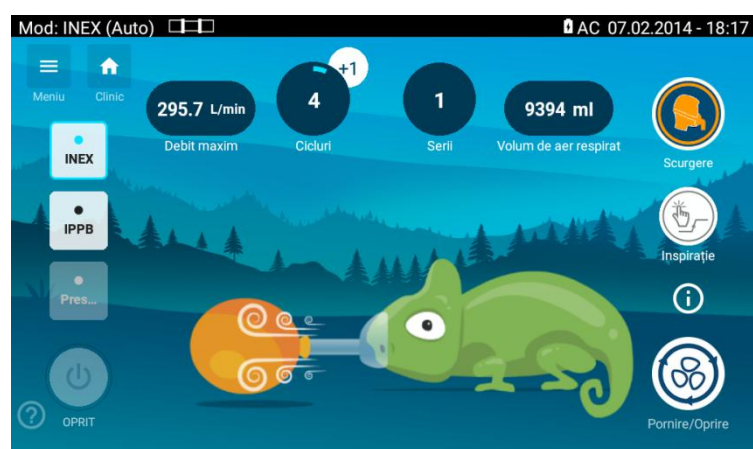

În timpul pauzei, cameleonul și balonul nu se mișcă.

Monitorizările:


- Debitul maxim este actualizat după fiecare expir
- Contorul descrescător de cicluri scade după fiecare expir. Acesta poate fi crescut cu butonul „+1” în timpul ultimului ciclu
- Contorul de serie este incrementat după fiecare pornire a terapiei. Acesta este resetat când se modifică presetarea sau se închid dispozitivele
- Volumul de aer respirat este actualizat după fiecare inspir
- Indicatorul de scurgere va deveni portocaliu la sfârșitul inspirației dacă presiunea inspirației finale nu atinge 80% din presiunea stabilită. Prima cauză ar fi prezența unor scurgeri importante la nivelul interfeței cu pacientul. O altă cauză ar putea fi și faptul că timpul de inspirație este prea scurt pentru ca presiunea pulmonară să atingă presiunea inspiratorie stabilită.

La sfârșitul fiecărei serii (sau când se oprește terapia folosind butonul de ignorare), se afișează o fereastră pop-up în care pacientul este întrebat dacă să se efectueze o nouă serie sau nu.



Cronometrul este elocvent. Faceți clic pe „Ignorare pauză” pentru a reporni o serie sau pe „Oprere tratament” pentru a opri tratamentul.

## Ecranul Coaching în modul IPPB

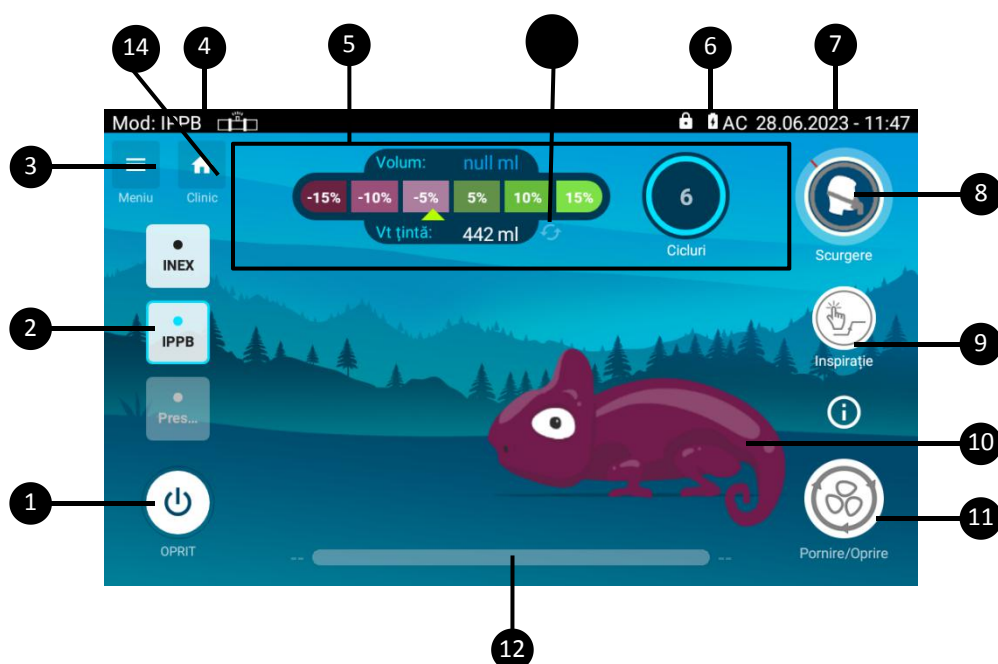

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buton de oprire</li> <li>2. Meniul modului de presetări (1-3): presetările configurate de clinician și accesibile pacientului atunci când este necesar.</li> <li>3. Butonul meniu: permite accesul la ecranul pacientului și la meniurile clinice</li> <li>4. Indicatorul modului de terapie: Modul INEX (manual/Auto) sau IPPB</li> <li>5. Monitorizare terapie: afișează valorile monitorizate în timp real în timpul terapiei.</li> <li>6. Numărul de respirații.</li> <li>7. Data: indică data în formatul AAAA/LL/ZZ. Ora: indică ora în formatul 24 h. Aceasta poate fi configurată și modificată din meniul Preferințe</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Indicator de scurgere</li> <li>9. Butonul de declanșare: permite declanșarea manuală a inspirației în timpul unui tratament</li> <li>10. Cameleon: animație care urmează terapia configurat pentru a ajuta pacientul</li> <li>11. Butonul Pornire/Oprere: începe sau oprește terapia.</li> <li>12. Bara de durată a terapiei: afișează timpul petrecut în terapie și timpul rămas din terapie</li> <li>13. Reinițializarea volumului țintă definit anterior</li> <li>14. Comandă rapidă pentru ecranul clinic</li> </ol> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Efectuarea terapiei IPPB fără funcția de coaching

Configurare o terapie IPPB și începeți terapia. După configurarea tratamentului, inspirul poate fi declanșat fie de pacient, fie folosind butonul dedicat.

Monitorizarea volumului arată evoluția în direct a volumului în timpul inspirului. Această monitorizare rămâne la valoarea volumului final până la următorul inspir.

Contorul de ciclu de respirație este incrementat la începutul fiecărui inspir

La sfârșitul fiecărei inspirații, scurgerile interfeței pacientului sunt evaluate, iar indicatorul de scurgere  devine portocaliu dacă există prea multe scurgeri la nivelul interfeței pacientului și că aceasta ar trebui reglată mai bine.

În timpul inspirației, cameleonul se umflă urmărind proporția volumului inițial atins. Acesta va deveni treptat verde când ajunge la volumul inițial și îl depășește.

Dacă setarea inițială a volumului este OPRITĂ, pentru primele 3 inspirații:

- Cameleonul nu se mișcă
- Volumul inițial rămâne nedefinit

De la prima inspirație dacă setarea volumului inițial este PORȚITĂ sau după 3 inspirații Dacă setarea volumului inițial este OPRITĂ:

- Volumul inițial este definit. Acesta este volumul mediu al primelor 3 inspiruri. Acesta rămâne neschimbat până la sfârșitul tratamentului.

În timpul expirului, cameleonul se va dezumfla treptat, ajungând în poziția și la culoarea inițială. Acesta rămâne așa până la următorul inspir.

Săgeata graficului care indică volumul se va mișca urmărind proporția volumului inițial atins. Ea va rămâne la nivelul maxim atins până la următorul inspir.

