




EOVE 70

Handledningsfunktioner Användarhandbok

Handledningssidan för INEX

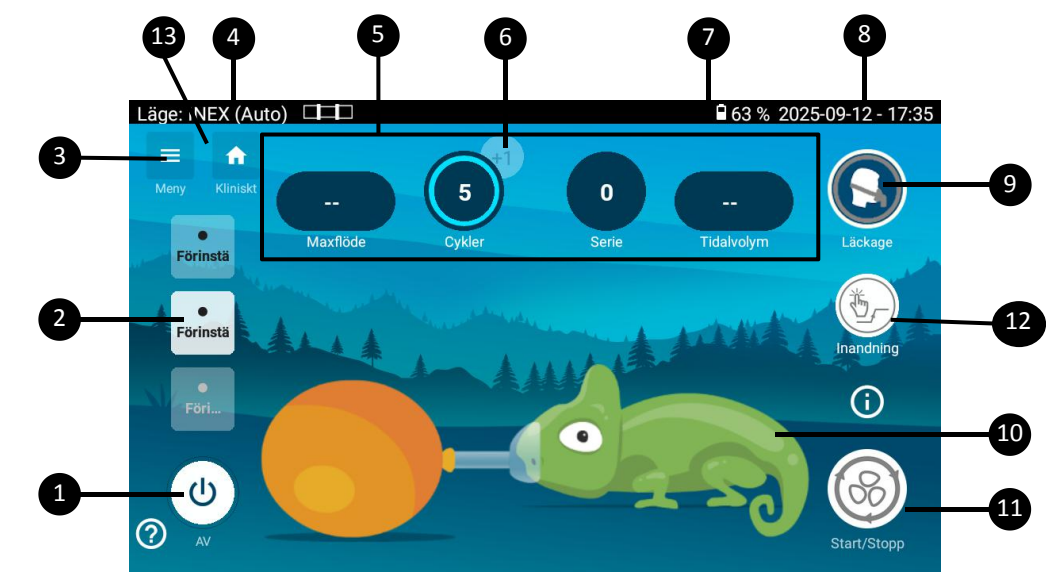


1. Avstängningsknapp 2. Meny för förhandsinställningar (1–3): inställningar som gjorts på förhand av läkaren och som patienten vid behov har åtkomst till. 3. Menyknapp: ger åtkomst till patientskärmen och behandlingsmenyer 4. Indikator för behandlingsläge: INEX (manuell/automatisk) eller IPPB 5. Övervakning av behandlingen: visar de övervakade värdena i realtid under behandlingen. 6. Knapp för tillägg av cykel: låter dig lägga till en cykel till den aktuella behandlingen om det behövs.	7. Indikatorer för batteritid: visar återstående batteritid eller huruvida batteriet är under laddning. 8. Datum: anger datumet i formatet ÅÅÅÅ/MM/DD. Tid: anger tiden på en 24-timmarsklocka. Detta kan ställas in och ändras i konfigurationsmenyn. 9. Läckageindikator. 10. Kameleont: Animation som följer den inställda behandlingen för att hjälpa patienten. 11. Start-/stopp-knapp: startar eller avbryter behandlingen. 12. Triggerknapp: Utlöser inspiration manuellt under behandlingen. 13. Genväg till den kliniska skärmen
---	---


Använda coachingfunktionen för att utföra behandling i INEX-läge

Konfigurera en INEX Auto-behandling och inled behandlingen. Kameleonten och ballongen följer de olika faserna av behandlingen:

- Under inandningen fylls kameleonten med luft och ballongen töms på luft

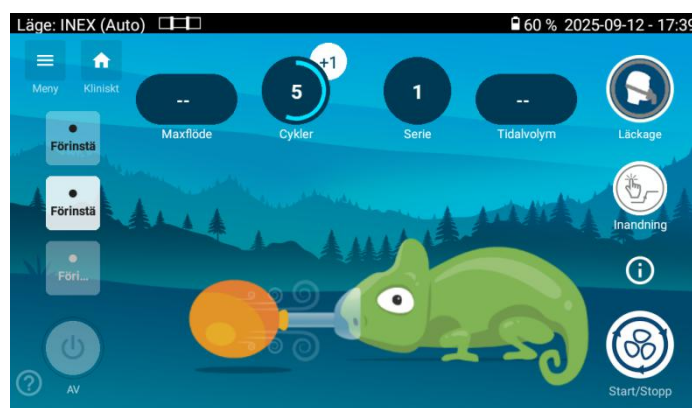

- Under utandningen töms kameleonten på luft och ballongen fylls med luft

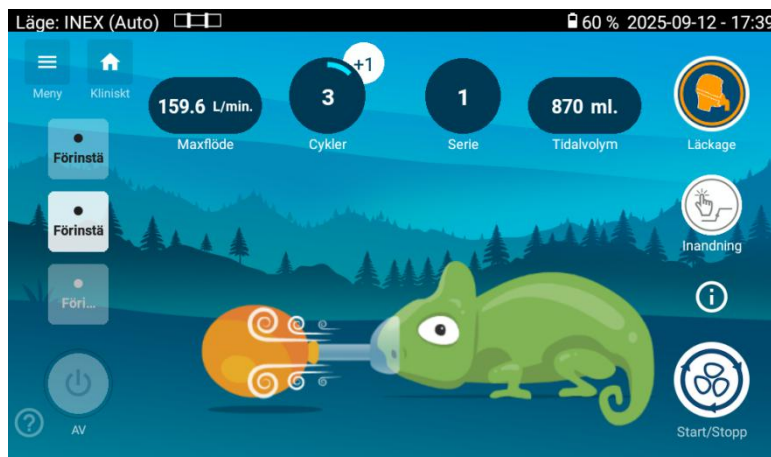

- Under pausen står kameleonten och ballongen stilla

Övervakningsfunktionerna:


- Toppflödet uppdateras efter varje utandning
- Antalet cykler i nedräknaren av cykler minskar för varje utandning. Antalet kan ökas med "+1"-knappen under den sista cykeln
- Serieräknaren ökas efter varje behandlingsstart. Det återställs när förinställningen ändras eller apparaterna stängs av
- Tidalvolym uppdateras efter varje inandning
- Läckageindikator: blir orange i slutet av inspirationen om det finns för mycket läckage vid patientgränssnittet och om det bör justeras bättre. Det kan också betyda att inspirationstrycket är för kort för att nå det inställda-inspirationstrycket. Det kan också betyda att inspirationstiden är för kort för att lungtrycket ska nå det inställda inspirationstrycket.

I slutet av behandlingen (eller i slutet av behandlingen med knappen "Hoppa över") visas ett fönster för att fråga patienten om en ny serie ska utföras eller inte.



Klockan fungerar som en vägledning. Klicka på "Hoppa över paus" för att starta om en serie eller på "Avsluta behandlingen" för att avsluta behandlingen.

Handledningssidan för IPPB

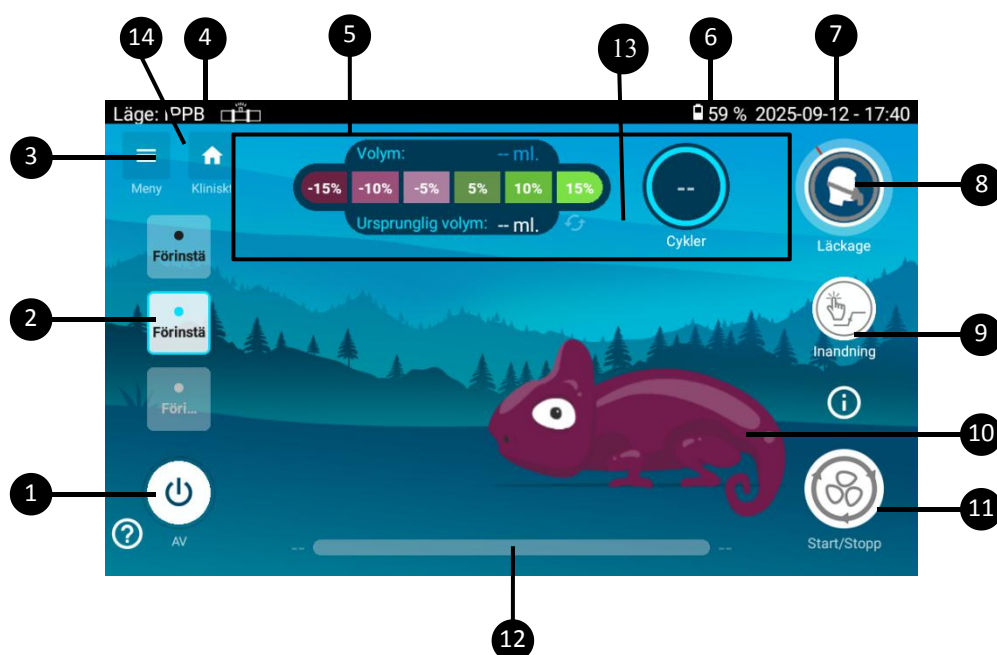

1. Avstängningsknapp 2. Meny för förhandsinställningar (1–3): inställningar som gjorts på förhand av läkaren och som patienten vid behov har åtkomst till. 3. Menyknapp: ger åtkomst till patientskärmen och behandlingsmenyer 4. Indikator för behandlingsläge: INEX (manuell/automatisk) eller IPPB 5. Övervakning av behandlingen: visar de övervakade värdena i realtid under behandlingen. 6. Antalet andetag.	7. Datum och tid i formatet ÅÅÅÅ/MM/DD (kan ändras i konfigurationsmenyn.) 8. Läckageindikator 9. Triggerknapp: Utlöser inspiration manuellt under behandlingen. 10. Kameleont: Animering som följer den inställda behandlingen för att hjälpa patienten 11. Start/stopp-knapp: startar eller avbryter behandlingen. 12. Markör för behandlingstid: visar avklarad behandlingstid och återstående behandlingstid 13. Återställ den tidigare angivna målvolymen 14. Genväg till den kliniska skärmen
--	--

Använda coachingfunktionen för att utföra IPPB-behandling

Konfigurera en IPPB-behandling och starta behandlingen. Efter att behandlingen har ställts in kan inandning utlösas av patienten eller via avsedd knapp.

Volymen visar utvecklingen av volymen under inandningen i realtid. Denna övervakning pågår ända till den slutliga inandningsvolymen, fram till nästa inandning. Andningsräknarens värde ökar vid varje ny inandning. I slutet av varje inspiration utvärderas patientgränssnittets läckage och

läckageindikatorn  blir orange om det uppstått för mycket läckage vid patientgränssnittet och bättre justering behövs.

Under inspiration kommer kameleonten att fyllas med luft i proportion till den ursprungliga volymen. Den kommer gradvis att övergå till grön när den ursprungliga volymen uppnåtts och överskridits.

Om inställningen för Ursprunglig volym är AV, gäller för de 3 första inblåsningarna:

- Kameleonten rör sig inte
- Ursprunglig volym förblir odefinierad

Från första inblåsningen om inställningen Ursprunglig volym är PÅ eller efter 3 inblåsningar Om inställningen Ursprunglig volym är AV:

- Ursprunglig volym definieras. Det är genomsnittet av volymen för de 3 första inandningarna. Den förblir oförändrad fram till slutet av behandlingen.

Under expirationen kommer kameleonten gradvis att tömmas på luft till dess att den återfår den ursprungliga positionen och färgen. Den förblir oförändrad fram till nästa inandning. Pilen i stapeldiagrammet för volym flyttar sig enligt den proportion av den ursprungliga volymen som nåtts. Den kommer att stanna vid den maximala nivå som uppnåtts fram till nästa inblåsning.

